

CATALOGUE MÉDICAL 2020



L'ACTIVITÉ GÉNÉRALE DE GCE

L'activité principale de GCE était à l'origine le marché du soudage et du coupage oxyacétylénique, mais après 100 ans d'expérience dans la manutention et les gaz purs, la gamme de produits à rapidement évoluée. Le portefeuille de produits comprend aujourd'hui une large variété de produits allant des détendeurs de pression simple en passant par les chalumeaux pour souder et couper, jusqu'aux systèmes d'approvisionnement en gaz fortement sophistiqués pour le médical et l'industrie électronique pour l'équipement analytique de laboratoire.

LE GROUPE GCE INTÈGRE 4 SECTEURS D'ACTIVÉS :

- > Technologie soudage/coupage
- > Robinets bouteille
- > Médical
- > Matériel de distribution des gaz

L'ORIGINE

L'origine de GCE (Gaz Control Equipment) remonte au début du 20ème siècle avec la découverte du soudage autogène. Le groupe GCE est une entité indépendante formée en 1987 par la fusion d'un leader mondial du gaz et d'une société d'équipement de soudage. Le Groupe GCE a développé rapidement depuis sa création et poursuit son expansion dans l'industrie des équipements de gaz par des fusions et des acquisitions. Au fil des années, le travail de Recherche et Développement du Groupe a abouti à des solutions novatrices qui sont rapidement devenues des normes standards sur le marché.

LES SERVICES GCE

Les principaux clients de GCE dans le domaine industriel sont des grossistes et des distributeurs locaux, les sociétés de gaz coopèrent avec le Groupe GCE.

Nous fournissons à nos clients des supports commerciaux, marketing et professionnels. Les principaux clients utilisateurs comme les chantiers navals, les ateliers de réparation et les fabricants d'équipement machines de soudage comptent pour une part significative du volume des ventes.

UNE GAMME COMPLÈTE POUR LE MÉDICAL

GCE possède une gamme complète d'équipements et accessoires hospitaliers comme des régulateurs de vide, boccas d'aspiration, débitmètres pré-calibrés ou à flotteur, sélecteurs de débits, humidificateurs, flexibles et prises médicales. L'Europe de l'Ouest, marché traditionnel pour l'ensemble des gammes de produits pour tous les types de clients associés au marché de l'Europe de l'Est en pleine croissance, sont à la base des activités de GCE. Nos produits sont donc conçus, non seulement en conformité avec toutes les normes européennes mais aussi en conformité avec les normes locales. Sur chacun des différents marchés, les distributeurs, les fournisseurs d'équipements médicaux, les hôpitaux ou les fabricants d'autres matériels médicaux que GCE équipe, sont également très importants dans la distribution des produits GCE et marqués CE. GCE propose des systèmes complets d'alimentation en oxygène, vide, gaz et mélanges anesthésiques, et autres gaz, pour les hôpitaux, les ambulances, les services d'urgence, l'hospitalisation à domicile, ainsi que les autres services spéciaux utilisant ces équipements. GCE est le leader européen sur le segment des détendeurs médicaux. La force de GCE se fonde sur la recherche et le développement des robinets à détendeur intégré et des détendeurs pour l'oxygène et autres mélanges gazeux à fonction thérapeutique. Economiseurs de gaz ultra modernes, concentrateurs d'oxygène et équipements auxiliaires viennent compléter cette gamme.



SOMMAIRE

ÉQUIPEMENT HOSPITALIER	5	DOMICILE	43
MediFlow®+	6	Concentrateur d'oxygène portable ZEN-O LITE™	44
MediFlow® II	7	Concentrateur d'oxygène transportable ZEN-O™	47
MediFlow® Ultra II	8	Économiseur électronique d'oxygène ECOLITE® 400	50
Multistar	10	Accessoires pour oxygénothérapie	52
Medimeter	11	URGENCE	57
Débitmètres	14	Valve à la demande EASE II	58
Medievac+	15	Système ambulance panel	61
Accessoires de régulateurs de vide	17	Ambulance panel II	62
Accessoires d'aspiration	18	MARS II	63
Régulateurs de vide	20	Sacs et accessoires	64
Autres dispositifs d'aspiration	21	Robinet à détendeur débilite intégré pour gaz médicaux	
MediConnect Ultra	22	MEDIVITAL®	65
Raccords	23	Robinets de bouteilles pour gaz médicaux	67
Duoline	26	Mediunit	69
Dédoublers	27		
Accessoires de transport	28		
Rails	30		
Mélangeur de gaz	31		
DÉTENDEURS HAUTE PRESSION	33		
Détendeurs haute pression MediSelect® II et MediReg®	34		
Elite	38		
Varimed	40		
MMR	41		

GCE FRANCE

NOTRE ORGANISATION COMMERCIALE

Nous disposons d'une équipe commerciale dédiée à la gamme médicale GCE Healthcare en France et à l'export. Notre équipe se tient à votre disposition pour toute information ou formation technique complète sur nos produits. Nous disposons également d'un réseau de distributeurs partenaires dans toute la France ainsi que de centres de maintenance agréés GCE.



MATHIEU BÉNIER
Directeur Général
mathieu.benier@gcegroup.com



JEAN-PAUL REBOIS
Marketing et Communication
jeanpaul.rebois@gcegroup.com

GCE SAS

ADRESSE

70 rue du Puits Charles
B.P 40110
58403 La Charité sur Loire
Cedex France

TÉLÉPHONE

+33 (0)3 86 69 46 20

FAX

+33 (0)3 86 70 09 81

**GCE, fabricant
de concentrateur d'oxygène**

LE SERVICE COMMERCIAL



JEAN-MARC PERREAU
Délégué Commercial Régional
Tél : 06 78 36 42 84
jean-marc.perreau@gcegroup.com



VANESSA OTERO
Assistante commerciale France
Tél : 03 86 69 46 20
vanessa.otero@gcegroup.com




FLAVIEN DUBIEL
Responsable Commercial
Tél : 06 87 60 58 28
flavien.dubiel@gcegroup.com



PASCALINE COTTANCEAU
Assistante commerciale Export
Tél : 03 86 69 46 00
pascaline.cottanceau@gcegroup.com



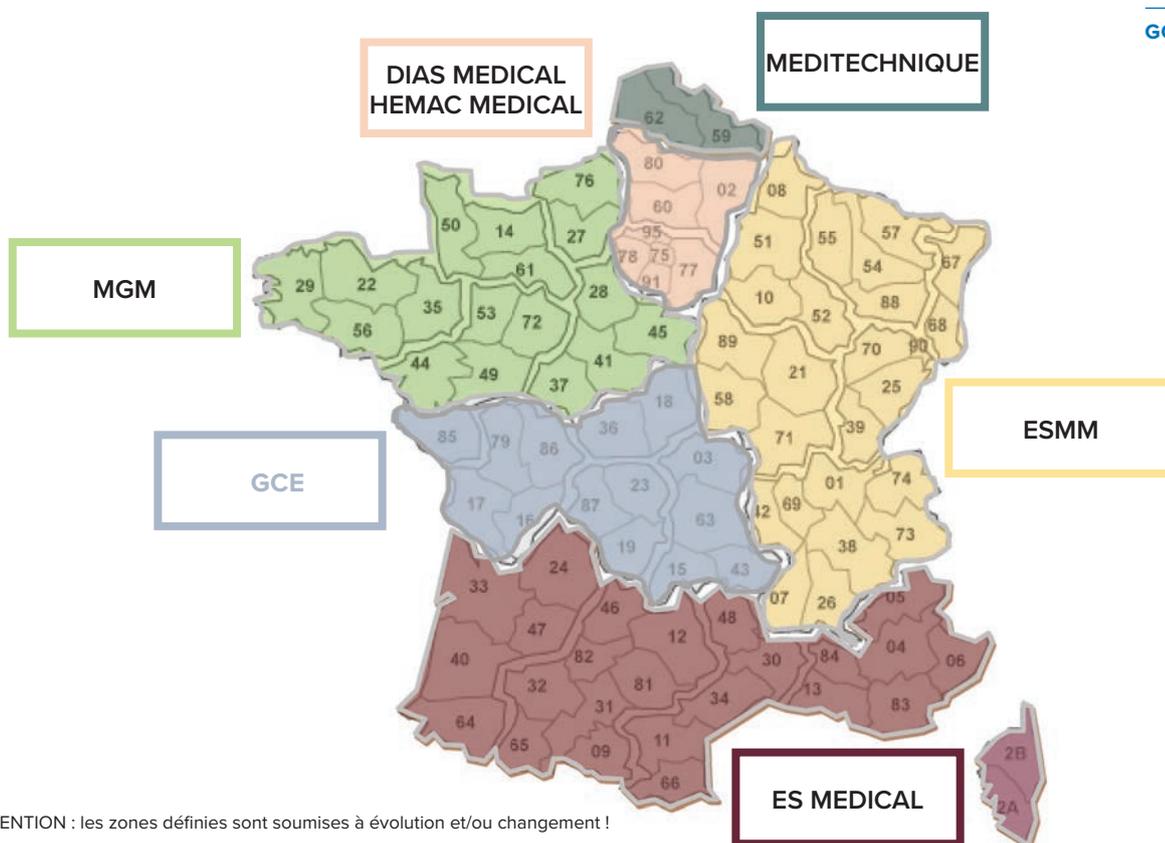

ATTENTION : les zones définies sont soumises à évolution et/ou changement !

LISTE DES SOCIÉTÉS AGRÉÉES POUR LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CURATIVE :

ZONE SUD

ES MEDICAL

BAT K
268 AV DE LA CAPELETTE
13010 MARSEILLE
Tél : 04 91 80 15 04 - Fax : 04 91 25 42 30 - esmmt@aol.com – M. Tarpin
(des dispositifs haute et basse pression et valve à la demande Ease II) :
Certificats valables depuis le 18/05/2009 et depuis le 31/03/2011 pour
la valve Ease II
Technicien agréé : M. Tarpin

ZONE IDF

DIAS MEDICAL

16 rue Harpignies
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Tél : 01 41 77 10 86
Fax : 01 60 31 09 48
diasmedical.adm@orange.fr – M. Michel Dias
(des dispositifs basse pression uniquement) :
Certificats valables depuis le 15/11/2012
Technicien agréé : M. Dias

ZONE EST

ESMM

4 Rue Ambroise Paré
69800 Saint-Priest
Tél : 04 78 90 89 23 – contact@esmm.fr - M. Perez
(des dispositifs haute et basse pression) :
Certificats valables depuis le 15/07/2010
Techniciens agréés : M. Alfaia

HEMAC MEDICAL

ZI des petites Haies
1- 3 rue Jean Lemoine - Bat B3
94000 Creteil
Tél : 01 49 81 77 77 - jp.brigot@groupehcm.com – M. Brigot
(des dispositifs basse pression uniquement) :
Certificats valables depuis le 15/11/2015
Techniciens agréés : M. PRIGENT - M. LEMAROIS

ZONE OUEST

GCE S.A.S

Merci de contacter GCE qui vous redirigera vers la société appropriée.
Tél : 03 86 69 46 00

ZONE NORD

MEDITECHNIQUE

31-1 AR rue de Luyot
Z.I. Lille Seclin
59113 SECLIN
Tél : 03 20 56 80 78 - Fax : 03 20 33 26 03
meditechnique.seclin@orange.fr – Mme Monique Pattyn
(des dispositifs haute et basse pression) :
Certificats valables depuis le 23/06/2010
Techniciens agréés : M. Vandenbruggen, M. Colditz et M. Delarue

ZONE CENTRE NORD-OUEST

MGM MAUGER GAZ MEDICAU

47 rue Georges Charpak
76150 St Jean du Cardonnay
Certificats valables depuis le 10/03/2016
Techniciens agréés : M. Djefal, M. Carpentier, M. David

ÉQUIPEMENT HOSPITALIER



MEDIFLOW®+

DÉBITMÈTRE PRÉ-CALIBRÉ

MediFlow® est un sélecteur de débit destiné au contrôle et à la mesure du débit d'air médical ou d'oxygène administré au patient.

- > Mécanisme innovant d'auto-sélection du débit associé à une technologie exclusive de débit continu entre deux valeurs.
- > Débitmètre conçu pour continuer à fonctionner même en cas de destruction accidentelle du volant de réglage;
- > Echelle des débits orientée à 45° pour une lecture à la fois frontale et latérale;
- > Sortie rotative à 360° afin d'optimiser l'orientation de la tubulure d'oxygénothérapie vers le patient;
- > Un large choix d'échelles de débit:
0 à 2 l/min, 0 à 6 l/min, 0 à 15 l/min et 0 à 25 l/min;
- > Disponible avec 9 ou 11 valeurs de débit suivant les modèles, élargissant ainsi, le champ d'applications thérapeutiques.

Le débit est réglé au moyen d'un volant à ailettes facile de manipulation.

La nouvelle technologie de contrôle des débits prévoit une sécurité essentielle pour le patient : l'assurance de recevoir le débit de gaz en toutes positions et ce, même en cas de positionnement erroné du sélecteur entre deux valeurs de débit.

Quatre types d'échelles de débit permettent de couvrir l'ensemble des besoins thérapeutiques en oxygène ou air médical.



Débitmètre MediFlow® raccordé à une prise murale d'un réseau d'oxygène hospitalier



Mediflow et Medieject en milieu hospitalier

Référence	Désignation	Gaz	Débit (l/min)	Utilisation
0727016	Mediflow®	O ₂	0-2	Néonatalogie
0727017	Mediflow®	O ₂	0-6	Pédiatrie
0727018	Mediflow®	O ₂	0-15	Adulte
0727019	Mediflow®	O ₂	0-25	Adulte / Urgences
0727034	Mediflow®	AIR	0-2	Néonatalogie
0727020	Mediflow®	AIR	0-6	Pédiatrie
0727021	Mediflow®	AIR	0-25	Adulte / Urgences

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Gaz :	oxygène, air médical
Plage de pressions d'entrée :	de 4 à 5 bar
Plages des débits :	
0 à 2 l/min	0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2
0 à 6 l/min	0 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
0 à 15 l/min	0 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 15
0 à 25 l/min	0 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 25
Raccord d'entrée :	Embout verrouillable NF, (autres normes sur demande)
Raccord de sortie :	M 12x1,25 (autres sur demande) et olive livrée de série
Matériau du corps :	Laiton nickelé
Volant de réglage :	Polyamide
Joints :	EPDM
Dimensions :	Diamètre 45 mm
	Longueur 95 mm
	Poids 350 g

Garantie de la présence d'un débit sur un positionnement intermédiaire



Confort et sécurité d'alimentation grâce à une olive de sortie orientable à 360°



MEDIFLOW® II



DÉBITMÈTRE PRÉ-CALIBRÉ 50 L/MIN

MediFlow® II 50 l/min est un débitmètre destiné à être utilisé en réanimation et pour les traitements par CPAP.

- > Mécanisme innovant d'auto-sélection du débit associé à une technologie exclusive de débit continu entre deux valeurs. Débitmètre conçu pour continuer à fonctionner même en cas de destruction accidentelle du volant de réglage
- > Lecture à la fois frontale et latérale des valeurs de débit réglées
- > Permet d'obtenir jusqu'à 50 l/min pour alimenter des dispositifs médicaux intermédiaires entre le débitmètre et le patient (alimentation directe possible du patient jusqu'à 15 l/min)

SORTIE ROTATIVE À 360° AFIN D'OPTIMISER L'ORIENTATION:

- > De la tubulure d'oxygénothérapie vers le patient.
- > Des fenêtres de lecture à la convenance de l'utilisateur.

Référence	Gaz	
0726104	MEDIFLOW® 0-50 l/min O ₂ - 4,5 bar	
0726105	MEDIFLOW® 0-50 l/min AIR - 4,5 bar	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Gaz :	oxygène, air médical	
Plage de pressions d'entrée :	de 4 à 5 bar	
Plages des débits (l/min) :	0 - 2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 - 15 - 20 - 25 - 35 - 50	
Raccord d'entrée :	Embout verrouillable NF, (autres normes sur demande)	
Raccord de sortie :	M 12x1,25 (autres sur demande) et raccord de sortie livré de série	
Volant de réglage :	Polyamide	
Joints :	EPDM	
Garantie :	2 ans	
Révision :	pas de révision obligatoire pendant toute la durée de vie de l'appareil, un contrôle est conseillé	
Statut réglementaire :	Conforme à la directive sur les dispositifs médicaux n°93/42/C.E.E. Conforme à la norme EN 15 002 (débitmètres à colonne pour connection aux prises du réseau de fluides médicaux) Conforme à la norme EN 1789:2000 (véhicules médicaux et leurs équipements – ambulances)	
Dimensions :	Diamètre	40 mm
	Longueur	75 mm
	Poids	350 g



Débitmètre MediFlow® II raccordé à la prise murale d'un réseau d'oxygène hospitalier



DÉBITMÈTRE PRÉ-CALIBRÉ À DÉTENTE INTÉGRÉE DESTINÉ AUX GAZ MÉDICAUX

MEDIFLOW® ULTRA II

Le MediFlow® Ultra II est la nouvelle génération de débitmètres GCE de type pré-calibré à détente intégrée destiné aux gaz médicaux. Une large gamme de modèles est proposée pour couvrir les besoins des différentes applications thérapeutiques, des soins de la néonatalogie jusqu'à la réanimation..

- > Le mini détendeur intégré procure un débit très stable et très précis, indépendamment de la pression d'alimentation présente dans le réseau de distribution centralisée ou la bouteille de gaz.
- > Mécanisme innovant d'auto-centrage garantissant facilité et sécurité dans la sélection des débits, avec, de plus, la présence continue de gaz, même entre deux valeurs de réglage. La conception du débitmètre permet même la continuité de la délivrance du gaz y compris dans les cas accidentels de destruction du volant de réglage.
- > Lecture latérale et frontale des valeurs de débit réglées.
- > Olive de sortie du débit rotative à 360°, permettant ainsi une meilleure orientation de la tubulure d'oxygénothérapie vers le patient et évitant le risque de torsions.
- > Un nombre accru d'orifices pré-calibrés augmente les possibilités thérapeutiques : en plus de la version traditionnelle réglable de 0 à 15 l/min, la version avec la position supplémentaire 25 l/min permet d'autres types d'utilisation en réanimation; la valeur additionnelle de 7 l/min proposée dans ces deux versions étant destinée à la nébulisation.
- > Design ergonomique et fuselé, facilitant préhensions, manipulations et nettoyages.
- > Le débit est réglé au moyen d'un volant cranté facile de manipulation. Quatre types d'échelles de débit permettent de couvrir l'ensemble des besoins thérapeutiques en oxygène ou air médical.

Indépendance vis-à-vis des fluctuations de la pression située en amont, dans la limite d'une plage comprise entre 2,8 et 8 bar.



L'olive de sortie rotative à 360° élargit le champ des orientations de tubulures.

Système de sécurité unique à débit continu : même en cas de positionnement accidentel entre deux valeurs, le gaz continue d'être administré au patient.

Deux fenêtres de lecture - frontale et latérale - permettent une très bonne visibilité des valeurs de débit réglées.



MEDIFLOW® ULTRA II



DÉBITMÈTRE PRÉ-CALIBRÉ

MediFlow® Ultra II est la nouvelle génération de débitmètres GCE de type pré-calibré à détente intégrée destinée aux gaz médicaux.

- > Mécanisme innovant d'auto-sélection
- > Lecture frontale et latérale de l'échelle de débits
- > Olive de sortie du débit rotative à 360° permettant une meilleure orientation
- > Un large choix d'échelles de débits disponible avec 9 ou 11 valeurs de débits pour plus de possibilités thérapeutiques
- > Design ergonomique et fuselé, facilitant préhensions, manipulations et nettoyages

Référence	Désignation	Gaz	Débit (l/min)	Utilisation
0728113	MediFlow® Ultra II	O ₂	0-2	Néonatalogie
0728114	MediFlow® Ultra II	O ₂	0-6	Pédiatrie
0728186	MediFlow® Ultra II	O ₂	0-15	Adulte
0728115	MediFlow® Ultra II	O ₂	0-25	Urgence
0728185	MediFlow® Ultra II	AIR	0-6	Pédiatrie
0728116	MediFlow® Ultra II	AIR	0-25	Adulte / Urgence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Gaz :	oxygène, air médical	
Plage de pressions d'entrée :	2,8 à 8 bar	
Pression de sortie :	max. sans débit 2,1 bar	
Plages des débits :		
0 à 2 l/min	0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2	
0 à 6 l/min	0 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	
0 à 15 l/min	0 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 15	
0 à 25 l/min	0 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 25	
Raccord d'entrée :	Selon norme AFNOR	
Raccord de sortie :	M12x1,25 avec olive livrée de série	
Matériaux :	Corps	Laiton nickelé
	Volant	Polyamide
	Joints	EPDM
	Filtre	Bronze fritté et acier inoxydable
Dimensions	Diamètre	39 mm
	Longueur	77 mm
	Poids	350 g
Garantie :	2 ans	
Révision :	pas de révision obligatoire pendant toute la durée de vie de l'appareil, un contrôle est conseillé	
Statut réglementaire :	Conforme à la directive sur les dispositifs médicaux n°93/42/C.E.E.	
	Conforme à la norme EN 10524-4 (Débitmètres à détente intégrée pour gaz à usage médical)	
	Conforme à la norme EN 1789:2000 (véhicules médicaux et leurs équipements – ambulances)	



MULTISTAR



0728184

MULTISTAR

DISPOSITIF SPECIAL URGENCES :

PLAN BLANC ET PLAN NOMBREUSES VICTIMES

un module composé de 4 débitmètres Mediflow® Ultra II, à sangler sur une bouteille d'oxygène pour secourir jusqu'à 5 victimes (en incluant le détendeur-débitmètre de la bouteille).

Flexible d'oxygène de 50 cm à commander séparément pour relier la prise du Mediflow® Ultra à la prise d'alimentation.

Référence	Désignation (livré avec olive de sortie)	Gaz
0728184	MediFlow® Ultra II 4x15 l/min (Multistar)	O ₂



KIT COMPLET :

0728184 MULTISTAR

0731001 MEDICONNECT 6.7X12.7 O₂ 0.50m

0720164 MEDISELECT O₂ 15L/min

Conforme à l'article r665-11 du code de la santé publique, marquage CE et Normes AFNOR




DÉBITMÈTRE À COLONNE DESTINÉ AUX GAZ MÉDICAUX

MEDIMETER

MediMeter est un débitmètre à colonne destiné au contrôle et à la mesure du débit d'oxygène ou d'air médical administré au patient.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Indicateur du débit de type flotteur à surface plate pour une lecture plus facile et fiable
- Design ergonomique, surfaces de nettoyage aisées
- Disponible selon 3 plages de débit, avec embout verrouillable ou système de montage au rail
- En option, l'accessoire Aquaselect permet d'alterner rapidement la sortie du débit par la tubulure d'oxygénothérapie ou par l'humidificateur, sans démontage de l'un ou de l'autre et sans arrêt du débitmètre ; l'olive coudée rotative à 360° et la vanne ¼ de tour assurent un confort d'utilisation très apprécié.
- Nouveau robinet : souple & robuste
- Flotteur conçu pour résister aux chocs de pression
- Echelle des débits avec lecture facilitée des valeurs

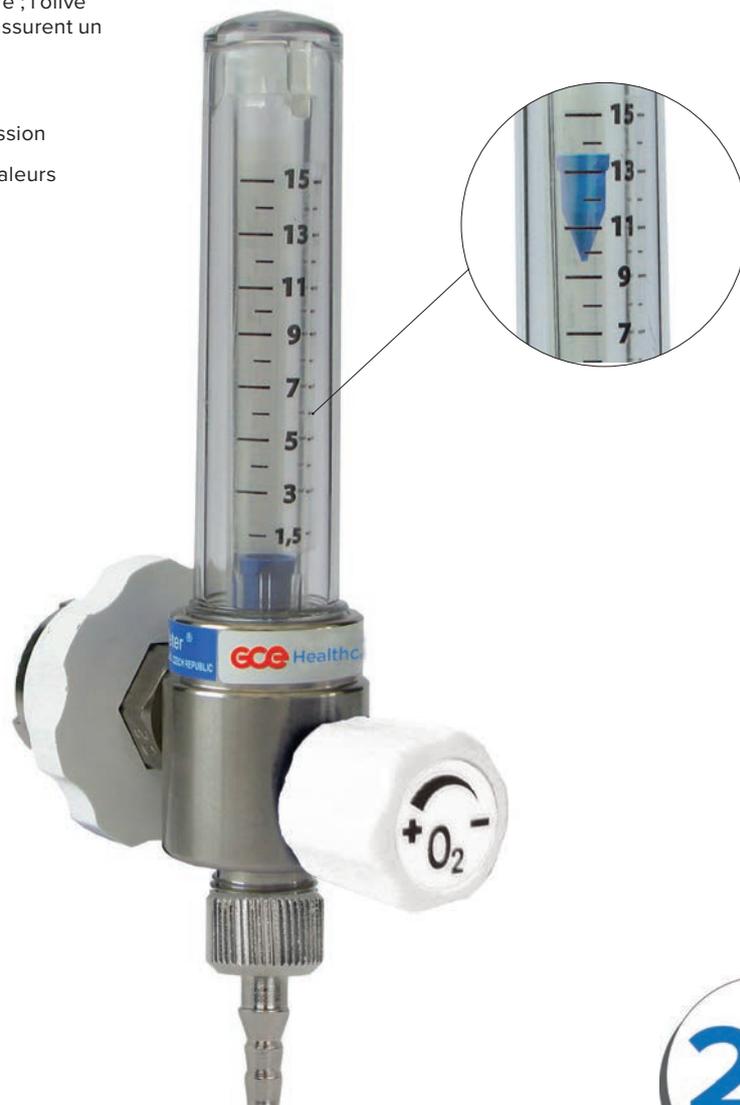

MEDIMETER



0730101



0730192



0730192

DÉBITMÈTRES À COLONNE

- > Medimeter est un débitmètre destiné à la régulation et à la mesure de l'oxygène ou de l'air médical administré aux patients.
- > Simplicité d'utilisation
- > Bonne lisibilité grâce à son flotteur à surface plane
- > Robustesse grâce à son corps en laiton chromé et ses colonnes en polycarbonate

Référence	Désignation	Gaz	Débit (l/min)	Utilisation
0730126	MEDIMETER	O ₂	0-5 l/min	Néonatalogie / Pédiatrie
0730101	MEDIMETER	O ₂	0-15 l/min	Adulte
0730192*	MEDIMETER	O ₂	0-15 l/min	Adulte
0730127	MEDIMETER	O ₂	0-30 l/min	Urgence
0730129	MEDIMETER	AIR	0-5 l/min	Néonatalogie / Pédiatrie
0730130	MEDIMETER	AIR	0-15 l/min	Adulte
0730132*	MEDIMETER	AIR	0-15 l/min	Adulte
0730131	MEDIMETER	AIR	0-30 l/min	Urgence

* avec kit rail clips (flexible, 1,5 m)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Gaz :	oxygène, air médical
Plage de pressions d'entrée :	de 4 à 5 bar
Plages des débits :	0-5 l/min 0-15 l/min 0-30 l/min
Raccord d'entrée :	Embout verrouillable NF ou bride pour rails 30×10 avec flexible muni d'un raccord NF
Raccord de sortie :	M12×1.25 et raccord étagé de tubulure (livré de série)
Matériau du corps :	Laiton nickelé
Matériau du robinet :	Polyamide
Matériau des colonnes :	Polycarbonate
Joint :	EPDM
Dimensions :	Diamètre 32 mm Hauteur 160 mm Profondeur 60 mm
Poids :	370 g
Garantie :	2 ans
Révision :	pas de révision obligatoire pendant toute la durée de vie de l'appareil, un contrôle est conseillé Conforme à la directive sur les dispositifs médicaux n°93/42/C.E.E.
Statut réglementaire :	Conforme à la norme EN 15 002 (débitmètres à colonne pour connection aux prises du réseau de fluides médicaux)



ACCESSOIRES POUR RACCORDS DE SORTIE DE DÉBITMÈTRES



9404780



9454150

Référence	Désignation
9454150	Pochette de 10 olives de sortie 4 cran NF (M12x1,25) + joint d'étanchéité
9427650	Pochette de 10 joints d'étanchéité pour olive NF (M12x1,25)
9404780	Adaptateur en métal pour raccorder un humidificateur 9/16'
K291645	Lot de 10 adaptateurs en polypropylène pour humidificateurs 9/16'
K305240	Accroche au rail



Aquaselect installé

ce dispositif permet de passer du mode "tubulure" au mode "humidificateur" sans modifier l'installation.

HUMIDIFICATEURS MEDIWET



K293491

Référence	Désignation
K293491	MEDIWET II 200 ml - autoclavable à 121°C
K293498	MEDIWET II 200 ml - autoclavable à 134°C
K294415	Pochette de 10 diffuseurs



Mediwet en milieu hospitalier

CONSOMMABLES POUR HUMIDIFICATEURS MEDIWET II

Référence	Désignation
14175080	Lunettes nasales adulte à débit protégé, embouts droits - 2,10 m (par 50)
14090500	Masque oxygène adulte + tubulure - 2,10 m (par 50)
14112137	Tubulure à oxygène, connexion standard, débit protégé - 2,10 m (par 50)



14175080



14090500



DÉBITMÈTRES

DÉBITMÈTRES SUR PRISE

DÉBITMÈTRES AU RAIL

Mediflow®
0727018



Medimeter
0730101



Mediflow Ultra® II
0728186



Medimeter avec kit rail clips
0730192



Mediflow Ultra® II avec kit rail clips
0738230



CONNEXION OLIVE

SELECTEUR AQUASELECT

Olive de sortie
9454150



Aquaselect
K303154



Mediwet II
K293498



Lunettes
14175080



LE RÉGULATEUR DE VIDE ULTRA COMPACT

MEDIEVAC+

Medievac+ est un système de régulation du vide qui permet à l'utilisateur de contrôler efficacement et en toute sécurité la thérapie par aspiration.

- Compact et léger
- Le niveau d'aspiration du Medievac + est réglé via le volant de réglage à l'avant facilement accessible
- Ergonomie de l'orientation en diagonale du bouton marche-arrêt qui permet de conserver la valeur de dépression sélectionnée
- Vacuomètre rotatif pour une lecture facilitée
- Robustesse du volant (système débrayable en fin de course)
- Vacuomètre rotatif avec code couleurs pour une lecture facilitée
- Trois plages de réglage de la dépression répondent aux besoins majeurs
- Soupape de sécurité sur la version -250 mbar
- Disponible avec embout verrouillable ou système de montage au rail

VOLANT DE RÉGLAGE

LE "PLUS" TECHNIQUE :
le débrayage en fin de course évite de forcer le mécanisme.

FILTRE ENCAPSULÉ

Hygiénique et pratique à monter, il protège l'appareil des remontées de particules > 0.3 µm

VACUOMÈTRE ROTATIF !

AVANTAGES PERSONNELS SOIGNANTS :
Tournez le vacuomètre vers vous pour mieux lire le réglage.

AVANTAGE SERVICES TECHNIQUES :
L'absence de filetage sur le pied permet une meilleure résistance du corps lors de chaque remplacement.

BOUTON POUSSOIR MARCHE-ARRÊT

Permet de conserver le réglage lors de la mise en route suivante ;

La couleur visible indique l'état de fonctionnement du régulateur (vert, en marche ; rouge, à l'arrêt).

PERFORMANT !

DEBIT MAXIMAL DE 70 l/min
Des lignes épurées pour un nettoyage plus efficace



MEDIEVAC



0735110



0735172



RÉGULATEUR DE VIDE

Medievac+ est un nouveau système de régulation du vide, compact et léger, qui permet à l'utilisateur de contrôler efficacement et en toute sécurité, la thérapie par aspiration.

- > Volant frontal de réglage aisément accessible
- > Conservation de la valeur de dépression sélectionnée
- > Orientation en diagonale du bouton-poussoir de marche-arrêt
- > Vacuomètre rotatif et lisible
- > Connexion rapide à la source de vide et montage rapide et aisé des accessoires
- > Bonne accessibilité aux autres dispositifs des prises voisines

RÉGULATEURS DE VIDE MEDIEVAC+

Référence	Désignation
0735103	MEDIEVAC+ 250 mbar avec embout sans flacon, sans olive de sortie
0735110	MEDIEVAC+ 250 mbar avec embout et flacon + 1 filtre frontal
0735102	MEDIEVAC+ 600 mbar avec embout sans flacon, sans olive de sortie
0735109	MEDIEVAC+ 600 mbar avec embout et flacon + 1 filtre frontal
0735101	MEDIEVAC+ 1000 mbar avec embout sans flacon, sans olive de sortie
0735108	MEDIEVAC+ 1000 mbar avec embout et flacon + 1 filtre frontal

RÉGULATEURS DE VIDE MEDIEVAC+ MONTAGE AU RAIL

Référence	Désignation
0735172	MEDIEVAC+ 250 mbar, sans flacon (flexible : 1,5 m)
0735171	MEDIEVAC+ 600 mbar, sans flacon (flexible : 1,5 m)
0735170	MEDIEVAC+ 1000 mbar, sans flacon (flexible : 1,5 m)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction marche-arrêt :	Incluse de série
Dépression maximale d'alimentation :	
d'alimentation :	- 950 mbar
Débit maximal d'aspiration	
(à 1013 bar - 15°C) :	70 l/min ± 5 l/min à - 950 mbar
Précision du vacuomètre :	± 2,5 % de la pleine échelle
Seuil d'ouverture de la soupape :	Medievac+ 250 uniquement max. - 290 mbar
Raccord d'entrée :	Embout verrouillable NF ou bride pour rails 30x10 avec flexible muni d'un raccord NF
Raccord de sortie :	ISO G1/2' male
Dimensions :	Hauteur : 133 mm (sans bocal), 265 mm (avec bocal) Largeur : 63 mm Profondeur : 77 mm (sans raccord d'entrée)
Poids :	350 à 450 g
Matériau du corps :	ABS
Garantie :	2 ans
Révision :	pas de révision obligatoire pendant toute la durée de vie de l'appareil, un contrôle est conseillé
Statut réglementaire :	Conforme à la directive sur les dispositifs médicaux n°93/42/C.E.E. Conforme à la norme EN ISO 10079-3 (dispositifs médicaux d'aspiration)



ACCESSOIRES DE RÉGULATEURS DE VIDE

ACCESSOIRES POUR RÉGULATEURS DE VIDE MEDIEVAC+

Le bocal de sécurité MediCollect 100 constitue une protection recommandée du régulateur de vide et du système d'aspiration centralisé de l'établissement de soins. La capacité de 100 ml du bocal et la valve anti-retour dont il est équipé, garantissent un temps supplémentaire à l'utilisateur pour interrompre le processus d'aspiration avant la contamination du régulateur ou/et du réseau de vide, en cas de débordement des systèmes de recueil. A défaut, un simple raccord de sortie pour tubulure d'aspiration est également disponible. Le Medievac + est conforme à la norme EN ISO 10079-3.



548900291594



Bocal avec filtre



K291603

Référence	Désignation
548900291594	Bocal de sécurité 100 ml MediCollect en polysulfone autoclavable à 134°C (livré sans filtre)
K293492	Olive d'entrée G1/2 pour tuyau d'aspiration (vendue à l'unité)

*A changer au bout de 30 utilisations

CONSOMMABLES D'ASPIRATION

Un filtre complète le système du bocal de sécurité. L'utilisation d'un filtre est une recommandation de la norme NF EN 10079-3.

Le filtre de type encapsulé, à montage frontal est celui prévu pour MediEvac+ : pratique, hygiénique, visible, il sécurise l'ensemble du système.

Référence	Désignation
K291603	Filtre frontal pour MediCollect 100 réf. 548900291594 (lot de 10)
K291613	Filtre intérieur diam. 5 cm pour bocal (lot de 50)
K302427	Filtre mousse pour régulateurs de vide autres marques (lot de 20)


*A CHANGER A CHAQUE PATIENT

PIÈCES DÉTACHÉES POUR RÉGULATEURS DE VIDE MEDIEVAC+


Référence	Désignation
K294410	Lot de 10 joints d'entrée G1/2' pour bocal de sécurité
9428010	Embout verrouillable Vide (entrée M12x100 mâle) - lot de 10 + joints
9436460	Vacuomètre 0-250 mbar (lot de 5)
9436260	Vacuomètre 0-600 mbar (lot de 5)
9416640	Vacuomètre 0-1000 mbar (lot de 10)

* Pour toute autre demande de pièce détachée, merci de vous tourner vers nos réparateurs agréés GCE Healthcare


PLAGES DE LECTURE DES VACUOMÈTRES :

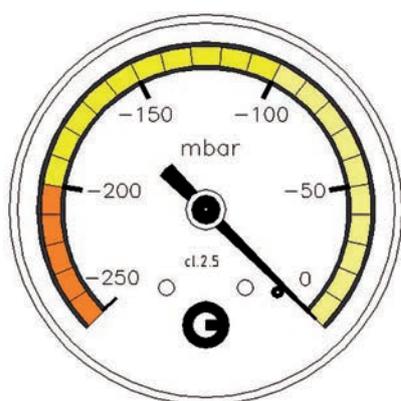

Modèle : 0 à -250 mbar
Ecart des graduations : 10 mbar

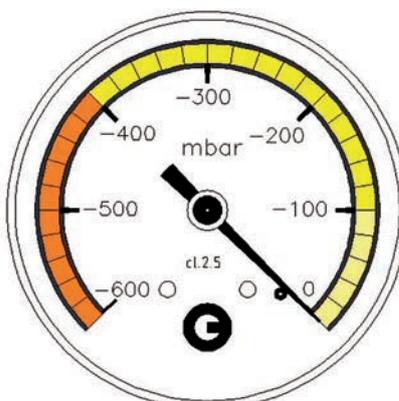

0 à -600 mbar
- 20 mbar

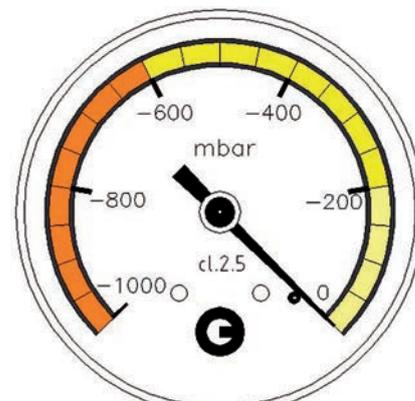

0 à -1000 mbar
-50 mbar



ACCESSOIRES D'ASPIRATION



325113237



K006968



K007218

TUYAU D'ASPIRATION

Référence	Désignation
325113237	Tuyau silicone transparent 6x12 mm, autoclavable à 134°C-18min-rouleau de 25 m
M401010P	Tuyau silicone transparent 8x14 mm, autoclavable à 134°C - 18 min - rouleau de 50 m

MANETTES-STOP VIDE MEDIPLUS AVEC CROCHET

Référence	Désignation
K006968	Manette stop-vide non stérile -adulte-enfant

CHARIOTS D'ASPIRATION MOBIVAC+

Référence	Désignation
K007218	Chariot avec 2 prises de vide + 2 bouches 2L + 2 porte-sondes, livré avec 1 flexible de 3 m à embout coudé (livré avec 2 régulateurs de vide 0735108)
K007219	Chariot avec 2 prises de vide + 1 rail (pro I compatible avec bouches de type type Medicollect/Receptal®/ Hospira®). Livré avec 1 flexible de 3 m à embout coudé et un porte-sondes (livré sans régulateur de vide)

VANNES DE VIDE DIRECT

Référence	Désignation
K007852	Raccord de vide en équerre pour tuyau diam. 9 mm
K007872	Raccord de vide droit pour tuyau diam. 9 mm



K007852



K007872



SYSTÈME D'ASPIRATION MEDICOLLECT



32511944



32511945



32511946



0727432



0727431



K291530



K291620



373234593



K291538



K291539



K006968

MEDICOLLECT

Le système d'aspiration Medicollect de GCE Healthcare est conçu pour être utilisé avec une source de vide (régulateur de vide, générateur de vide, etc.) en milieu hospitalier lors de la collecte de liquides corporels et de sécrétions de patients pendant une procédure médicale.

La gamme GCE Medicollect propose deux lignes de bocaux de recueil. La ligne principale propose une gamme de bocaux réutilisables, étanches à l'air, autoclavables et dotés d'une soupape de sécurité.

La gamme Medicollect comprend également différentes tailles de bocaux et de poches d'aspiration jetables, ce qui élimine le besoin d'autoclaver et les coûts associés.

Les poches sont également disponibles avec gel super absorbant, qui transforme le liquide en gel, ce qui réduit les risques de contamination pendant la manipulation et le transport.

SYSTÈME AVEC POCHE

Référence	Désignation	Taille (H×L×P)	Poids (g)	Autoclavable	Durabilité
32511944	Couvercle	137×53	78	121°C / 20'	30 cycles d'autoclave
32511945	Poche 1000	230×180×80	29	-	-
32511946	Poche 2000	300×180×80	35	-	-
0727605	Poche 1000 (SA*)	230×180×80	31	-	-
0727606	Poche 2000 (SA*)	300×180×80	37	-	-
0727432	Bocal 1000	133×150	290	121°C / 20'	30 cycles d'autoclave
0727431	Bocal 2000	133×250	432	121°C / 20'	30 cycles d'autoclave

* Superabsorbant

SYSTÈME RÉUTILISABLE

Référence	Désignation	Taille (H×L×P)	Poids (g)	Autoclavable	Durabilité
K291530	Bocal 2000 + Couvercle	302×135×130	600	121°C / 20'	30 cycles d'autoclave
K291540	Bocal 1000 + Couvercle	236×115×110	340	121°C / 20'	30 cycles d'autoclave
K291620	Bocal 2000 + Couvercle	302×135×130	600	134°C / 18'	30 cycles d'autoclave
K291619	Bocal 1000 + Couvercle	236×115×110	340	134°C / 18'	30 cycles d'autoclave

DONNÉES TECHNIQUES

		Version avec poche	Version réutilisable
Matériaux	Bocal:	Polycarbonate (121°C)	Polycarbonate (121°C), Polysulfone (134°C)
	Couvercle:	Polycarbonate, Élastomère thermoplastique (TPE)	Polypropylène
	Olive:	Polyéthylène	Laiton chromé
	Poche:		-
Système anti-débordement:		Intégré	Vanne à boisseau
Raccord côté patient:		Adaptateur tuyau pour ø 9	
Vide maximum applicable:		-95 kPa (-950 mbar)	
Vide minimum applicable*:		-20 kPa (-100 mbar)	
Débit maximum:		100 l/min	
Conditions de stockage:		-40 ± 2°C à +60 ± 5°C et 10 à 100% RH	
Conditions de fonctionnement:		-18 ± 2°C à +40 ± 5°C et 40 à 70% RH	
Dimensions de l'accroche en T (accroche au rail):		40 mm×30 mm×5 mm	

* Pour le bon fonctionnement du dispositif de protection anti-débordement


ACCESSOIRES

Référence	Désignation
373234593	Adaptateur tuyau d'aspiration pour ø 9 interne
373234931	Adaptateur en T pour aspiration
302532P	Tuyau; 0,35 m; ø 6/12
325113237	Flexible en silicone; 25m; 6×12
9435440	Flexible en silicone; 5m; 6×12
9435450	Flexible en silicone; 1m; 6×12
K291538	Support cathéter (sans accroche)
K291539	Support cathéter (avec accroche)
K006968	Dispositif d'arrêt de vide manuel, non stérile pour les adultes

RÉGULATEURS DE VIDE

RÉGULATEURS DE VIDE SUR PRISE

RÉGULATEURS DE VIDE AU RAIL

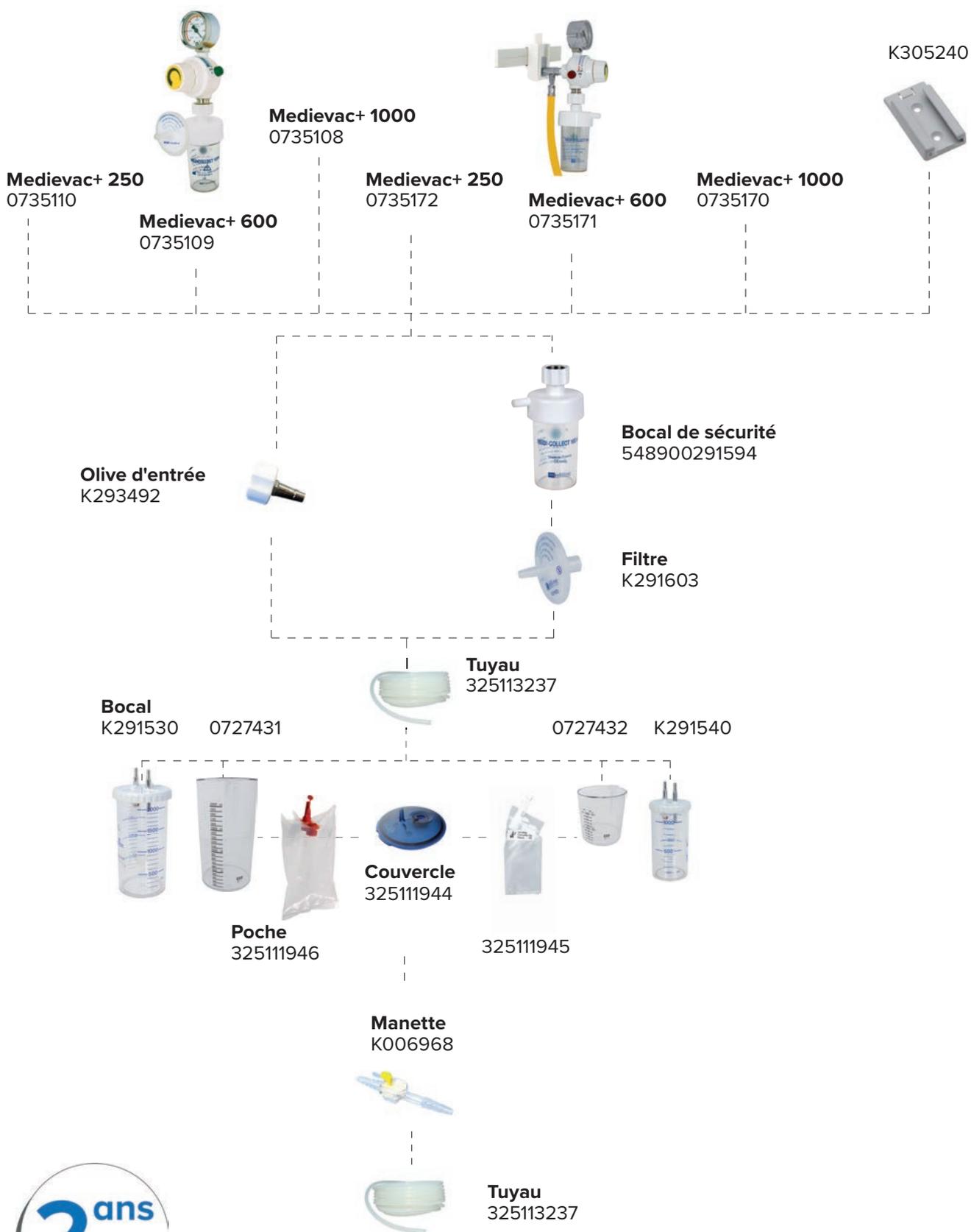

AUTRES DISPOSITIFS D'ASPIRATION

MEDIEJECT II

Le MediEject II est un dispositif utilisant la technologie Venturi pour assurer toutes les thérapies d'aspiration médicale. Assure l'aspiration intra-hospitalière en l'absence d'autre source de vide

- > Durée de vie de 10 ans
- > Pas de révision obligatoire pendant toute la durée de vie de l'appareil
- > Système unique pour régler le dispositif et la fonction marche/arrêt
- > Design ergonomique facile à nettoyer
- > Excellentes performances d'aspiration
- > Faible consommation de gaz et niveau sonore faible
- > Disponible avec embout verrouillable ou système d'accroche au rail
- > Dépression maximale de -800 mbar
- > Niveau d'aspiration réglable avec un robinet à aiguille pour une finesse de réglage optimale


Référence	Désignation
0735417	MEDIEJECT O2 avec embout verrouillable et raccord rapide NF
0735418	MEDIEJECT O2 avec embout verrouillable et raccord rapide NF - accroche au rail
0735419	MEDIEJECT O2 avec embout verrouillable NF et pince fixe à 90°
0735420	MEDIEJECT AIR avec embout verrouillable NF et pince fixe à 90°
0735421	MEDIEJECT AIR avec embout verrouillable NF et pince fixe à 90°
0735422	MEDIEJECT AIR avec embout verrouillable et pince fixe à 90°
14090328	Filtre anti bactérien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Fonction marche-arrêt :	Marche (ON) : bouton tiré / Arrêt (OFF) : bouton poussé
Pression d'alimentation max.	4,5 bar
Débit d'aspiration max. :	25 l/min
Consommation de gaz max. :	38 l/min
Précision du manomètre :	+/- 2.5 %
Raccord d'entrée :	AFNOR, autres standards disponibles
Raccord de sortie :	Olive pour tubulure d'aspiration
Dimensions du corps :	Hauteur : 115 mm
	Largeur : 105 mm
	Profondeur : 53 mm sans le raccord
Garantie :	2 ans
Révision :	pas de révision obligatoire pendant toute la durée de vie de l'appareil, un contrôle est conseillé



0735421

0735422

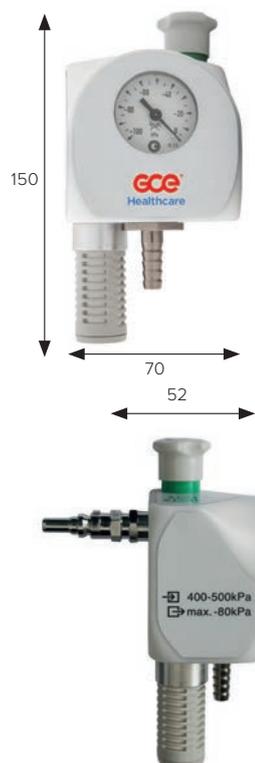

MEDICONNECT ULTRA

FLEXIBLES BASSE PRESSION

Mediconnect Ultra est une nouvelle génération de tuyaux flexibles destinés aux fluides médicaux. Leur conception est basée sur l'utilisation d'un tuyau ultra-résistant associée à la réalisation de tests de durabilité approfondis permettant de garantir une durée de vie de dix ans maximum, soit le double de la génération précédente.

Cette nouvelle qualité permet de répondre aux demandes des utilisateurs: meilleure résistance en applications intensives, plus grande facilité d'entretien grâce à la matière du tuyau, en même temps qu'une optimisation du budget d'équipement. L'avantage de Mediconnect Ultra est donc d'offrir une plus longue durabilité tout en préservant la sécurité des utilisateurs. Mediconnect Ultra est proposé en de nombreuses longueurs (de 0.5 m à 6 m), sous forme de montage mixte au niveau des embouts (droit et coudé) pour s'adapter aux configurations d'utilisation les plus diverses. D'autres types de montage (embouts droit/ droit ou coudé/coudé) sont disponibles sur simple demande.

AVANTAGES :

- > Robustesse du tuyau
- > Facilité d'entretien
- > Bagues compactes, crans des prises renforcés
- > Antistatique
- > Durée de vie maximale : 10 ans



Flexible oxygène blanc :
raccord 3 crans ref 0731016



Flexible air noir et blanc :
raccord 2 crans ref 0731026



Flexible protoxyde d'azote bleu :
raccord 3 crans ref 0731016



Flexible vide jaune : raccord 2
crans ref K009432

Référence	Désignation
0731001	Flexible 6,7x12,7 - O ₂ - 0,50 m, 1 embout droit + 1 embout en équerre
0731003	Flexible 6,7x12,7 - O ₂ - 1,50 m, 1 embout droit + 1 embout en équerre
0731004	Flexible 6,7x12,7 - O ₂ - 2,00 m, 1 embout droit + 1 embout en équerre
0731006	Flexible 6,7x12,7 - O ₂ - 3,00 m, 1 embout droit + 1 embout en équerre
0731007	Flexible 6,7x12,7 - O ₂ - 5,00 m, 1 embout droit + 1 embout en équerre
0731021	Flexible 6,7x12,7 - Air médical - 0,50 m, 1 embout droit + 1 embout en équerre
0731022	Flexible 6,7x12,7 - Air médical - 1,00 m, 1 embout droit + 1 embout en équerre
0731023	Flexible 6,7x12,7 - Air médical - 1,50 m, 1 embout droit + 1 embout en équerre
0731024	Flexible 6,7x12,7 - Air médical - 2,00 m, 1 embout droit + 1 embout en équerre
0731026	Flexible 6,7x12,7 - Air médical - 3,00 m, 1 embout droit + 1 embout en équerre
0731027	Flexible 6,7x12,7 - Air médical - 5,00 m, 1 embout droit + 1 embout en équerre
0731043	Flexible 6,7x12,7 - N ₂ O - 1,50 m, 1 embout droit + 1 embout en équerre
0731044	Flexible 6,7x12,7 - N ₂ O - 2,00 m, 1 embout droit + 1 embout en équerre
0731046	Flexible 6,7x12,7 - N ₂ O - 3,00 m, 1 embout droit + 1 embout en équerre
0731047	Flexible 6,7x12,7 - N ₂ O - 5,00 m, 1 embout droit + 1 embout en équerre
K009402	Flexible 9x16 Vide 1,00 m, 1 embout droit + 1 embout en équerre
K009412	Flexible 9x16 Vide 1,50 m, 1 embout droit + 1 embout en équerre
K009422	Flexible 9x16 Vide 2,00 m, 1 embout droit + 1 embout en équerre
K009432	Flexible 9x16 Vide 3,00 m, 1 embout droit + 1 embout en équerre
K009452	Flexible 9x16 Vide 5,00 m, 1 embout droit + 1 embout en équerre



Embout standard nordique



Embout standard français AFNOR



Embout standard anglais BS



Embout standard allemand DIN



Embout standard NIST



RACCORDS

RACCORDS POUR MEDICONNECT NORMES AFNOR, DIN, NIST, SPÉCIFIQUES AUX GAZ



NF AFNOR FRANCE



Référence	
K007841	Raccord NF O2, coudé 90° 6mm
K007851	Raccord NF O2, coudé 90° 9 mm
K007844	Raccord NF Air, coudé 90° 6mm
K007854	Raccord NF Air, coudé 90° 9 mm
9450690	Raccord NF Air 800 new type - coudé 90° 9 mm
K007843	Raccord NF N2O, coudé 90° 6mm
K007845	Raccord NF N2, coudé 90° 6 mm
9439650	Raccord CO2, coudé 90° 6 mm
K007850	Raccord NF Air 800 old type - coudé 90° 9 mm
K007852	Raccord NF Vide, 90°
K007861	Raccord NF O2 droit
K007864	Raccord NF AIR droit
K007863	Raccord NF N2O droit
K007866	Raccord NF CO2 droit
K007872	Raccord NF Vide droit
9418920	Prise rapide NF 3/8A O2
9432300	Prise rapide NF 3/8A AIR
9442010	Prise rapide NF 3/8A N2O
9432310	Prise rapide NF 3/8A Vide
9417930	Prise rapide NF 1/4A O2
9433300	Prise rapide NF 1/4A AIR
9433310	PRISE RAPIDE NF 1/4A N2O
K292339	PRISE RAPIDE NF 1/4A VIDE



DIN ALLEMAGNE



Référence	
14090390	Raccord DIN O2, 120°
14116042	Raccord DIN O2, coudé 90°
14090391	Raccord DIN AIR, 120°
14116043	Raccord DIN AIR, coudé 90°
14090392	Raccord DIN N2O, 120°
14116021	Raccord DIN Vide, 120°
9410970	Prise rapide DIN O2, 3/8"A
9423410	Prise rapide DIN O2, 1/4"A
9410980	Prise rapide DIN AIR, 3/8"A
9410990	Prise rapide DIN AIR, 1/4"A



NIST INTERNATIONAL



Référence	
9401320	Prise rapide DIN N2O, 3/8"A
14116035	Raccord NIST O2, droit
14116033	Raccord NIST AIR, droit
14116045	Raccord NIST O2, coudé 90°
9441980	Raccord NIST AIR, coudé 90°
9441990	Raccord NIST N2O, coudé 90°
14116030	Raccord NIST O2 droit
14116028	Raccord NIST AIR droit

RACCORDS POUR MEDICONNECT NORMES DIN, NIST, SPÉCIFIQUES AU GAZ

NORDIC SUEDE



325110382



325100222



325196831

Référence	
325110382	Raccord NORDIC O2, 6 mm
325100222	Raccord NORDIC N2O, 6 mm
325100223	Raccord NORDIC AIR, 8 mm
325100330	Raccord NORDIC N2, 6 mm
325111116	Raccord NORDIC CO2, 6 mm
325100224	Raccord NORDIC Vide, 10 mm
325196831	Raccord NORDIC O2, 6 mm coudé 90°
325195762	Raccord NORDIC Stecker 90° N2O, 6 mm coudé 90°
325195761	Raccord NORDIC Stecker 90° AIR, 8 mm coudé 90°
325195763	Raccord NORDIC Stecker 90° Vide, 10 mm coudé 90°
325196853	Prise rapide NORDIC O2, 6 mm
325195089	Prise rapide NORDIC N2O, 6 mm
325195091	Prise rapide NORDIC AIR, 8 mm
325197149	Prise rapide NORDIC CO2, 6 mm
325195092	Prise rapide NORDIC Vide, 10 mm
325196247	DUOLINE NORDIC O2, 6 mm prise
325196248	DUOLINE NORDIC AIR, 8 mm prise
325396735	DUOLINE NORDIC O2, rail
325396764	DUOLINE NORDIC AIR, rail



325196853



325196247



325396735



RACCORDS DROITS ET COUDÉS POUR MEDICONNECT



14090268

14090278



14090296

14090146



14090282

14090288



14090089



14090271



14090888



14090095



14090146

Référence	Désignation
14090277	Adaptateur 3/8"A - 9/16A
14090748	Adaptateur 3/8"I - 1/8A
14090865	Adaptateur 3/8"I - 3/8I
14090099	Adaptateur 3/8"I - 9/16A
14090192	Adaptateur 3/8"I - M10×1A
14116040	Adaptateur 3/8"I - M10×1A
14090093	Adaptateur 3/8"I - M12×1,25A
14115017	Adaptateur 3/8"I - M12×1A
14090252	Adaptateur 9/16"I - 3/8A FLACH
14090268	Adaptateur 9/16"I - 3/8A KONI
14115027	Adaptateur 9/16"I - 9/16"A
14090090	Adaptateur 9/16"I - M12×1,25A
14090281	Adaptateur G1/4"I - 9/16A
14090278	Adaptateur M10×1A - 9/16A
14115021	Adaptateur M10×1A - M12×1
14090721	Adaptateur M12×1A - 3/8A
14090094	Adaptateur M12×1,25I - 3/8A
9404780	Adaptateur M12×1,25II - 9/16A
14090276	Adaptateur M18×1A - 9/16A
14090282	Adaptateur M18×1I - 9/16A
14090296	Adaptateur M22×1,5I - 9/16A
14090279	Adaptateur M24×1,5A - 9/16A
14090280	Adaptateur M24×1,5I - 9/16A
14090274	Adaptateur M32×1,5A - 9/16A
14090288	Adaptateur M34×1,5A - 9/16A
14090283	Adaptateur W17,4×19I - 9/16A

OLIVES

Référence	Désignation
14090089	Olive 4-6 mm, 9/16"I
14090095	Olive 6 mm, 3/8"I
14090271	Olive 6 mm, 9/16"A
14090085	Olive 6 mm, 9/16"I
14090888	Olive 6 mm, G1/8"A
14090087	Olive 6 mm, M12×1,25I
14090938	Olive 6 mm, 3/8"I
14090145	Olive 6 mm, 3/8"I
14090147	Olive 6 mm, 9/16"I
14090227	Olive 6 mm, M12×1A
9439820	Olive 6 mm, M14×1A
14116037	Olive 6 mm, M15×1A
14090144	Olive 6 mm, M16×1,5I
9439830	Olive 6 mm, M20×1,5I
14090146	Olive 6 mm, 90°, 3/8"I
14090148	Olive 6 mm, 90°, 9/16"I



DUOLINE

Duoline est un dispositif destiné à dédoubler les prises d'alimentation en fluides médicaux. Ce système est sécurisé pour éviter les fuites de gaz : Si une seule sortie est raccordée, aucun gaz ne sera libéré par l'autre sortie.



K007246

DÉDOUBLEURS DE PRISES

DUOLINE R MONTAGE AU RAIL 30×10 MM

Référence	Désignation
K007245	Duoline R - Vide
K007246	Duoline R - Oxygène
K007247	Duoline R - Air médical



K007267

DUOLINE P MONTAGE SUR PRISE MURALE

Référence	Désignation
K007269	Duoline P - Vide
K007267	Duoline P - Oxygène
K007268	Duoline P - Air médical



TUYAU POUR FLUIDES MÉDICAUX

Référence	Désignation	Conditionnement
14119016	Tuyau air médical - PVC noir/blanc statique diam. 6.7×12.7 mm	30 m
14119011	Tuyau O ₂ /N ₂ O- PVC blanc/bleu antistatique diam. 6×12 mm - rouleau de 30 m	30 m
14119023	Tuyau vide - PVC jaune statique diam. 10×15 mm	30 m



DÉDOUBLEURS

DUOLINE P - Oxygène
K007267



DUOLINE R - Oxygène
K007246



Mediflow®
0727018



Medimeter
0730101



Mediflow Ultra® II
0728186



ACCESSOIRES DE TRANSPORT

CHARIOTS POUR BOUTEILLES DE GAZ



Référence	Désignation
14090630	Chariot pour bouteille de 10 et 20L, sans la sangle
325396137	Chariot pour bouteille de 10 et 20L, 3x10L ou 2x20L, sans la sangle Dimensions HxLxL : 935x426x352 (mm)
500009601P	Chariot pour bouteille de 2.5L ou 5L
325397691	Chariot pour bouteille de gaz (D = 116 mm)
14090643	Chariot pour bouteille de 5 litres, 2 roues, chromé, poignée télescopique livré avec sangle
325396136P*	Chariot pour bouteille de 10 ou 20 litres, 2 roues, chromé, sans la sangle

* sangle à ajouter dans la commande

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Chariots
500009602	Sangle pour bouteille de 2.5L	
325396138P	Sangle pour bouteille de 5 ou 10 litres vendu en lot de 10 pièces	325396136, 325396137
325396139*	Sangle pour bouteille de 20 litres	325396136, 325396137

* référence 325396139 vendue uniquement avec la référence 325396136P



325396136



325396138P



14090643



325396137



14090630



325397691

RÂTELIER MURAUX POUR BOUTEILLES DE GAZ



H03110301

Référence	Désignation	Dimensions
H03110301	Râtelier à sangle - 1 bouteille	220x80 mm
215191074P	Râtelier à chaîne - 1 bouteille	260x55 mm
215191075P	Râtelier à chaîne - 2 bouteilles	550x55 mm

Désignation bouteille O2	Volume en eau	Volume en gaz (oxygène)
B2	2 litres	0,4 m ³
B5	5 litres	1 m ³
B10	10 litres	2 m ³





ACCROCHE AU RAIL

Les accroches au rail font parties de systèmes de rails et sont conçues pour accrocher les dispositifs médicaux (débitmètres, appareils d'aspiration, éclairages, etc.) au rail.

Charge maximale sur l'axe vertical - 50 kg.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES:


La Mediclamp est universelle et peut s'appliquer sur tous les systèmes de rails

1: 10 × 25 mm

2: 10 × 30 mm

- > Facile à nettoyer
- > Léger
- > Raccord fixe
- > Ressort de réglage
- > Forme ergonomique
- > Entrée et sortie de gaz en métal
- > Tous les types de gaz sont disponibles
- > Possibilité d'accroche au mur
- > Compatible IRM
- > Connecteurs NIST pour fixer tous types de flexibles et de gaz
- > Conforme aux normes des ambulances

MONTAGE DE L'ACCROCHE AU RAIL

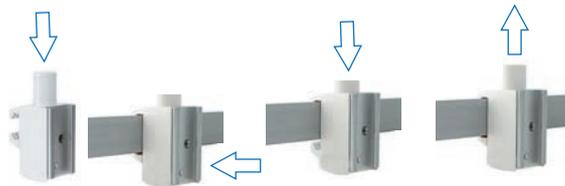

4 TYPES D'ACCROCHES

VERSION - RACCORD RAPIDE


VERSION - NIST

VERSION - ACCROCHE EN T

VERSION - ACCROCHE AU RAIL



RAILS

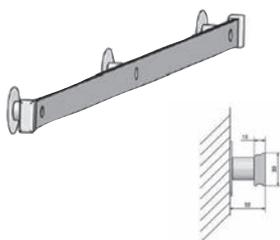

RAIL COMPLET (30X10 NORDIQUE) SANS VIS


Référence	Dénomination (mètre)	Matériau
325197665	1,0	Aluminium
325197666	1,5	Aluminium
325197667	2,0	Aluminium
325197668	3,0	Aluminium
183037406P*	3,0	Aluminium

* Seulement le rail sans protection et rondelle

ACCESSOIRES

Référence	Dénomination (mètre)	Matériau
180901001P	Protection (10 pcs)	Plastique
182037404P	Rondelle (10 pcs)	Aluminium
329000223	2,0	Aluminium

RAIL COMPLET (25×10 EU), SANS VIS

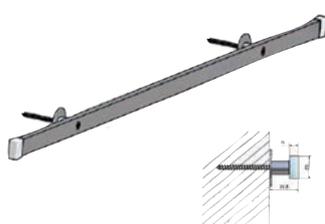

Référence	Dénomination (mètre)	Matériau
325197656	1,0	Acier inoxydable
325197657	1,5	Acier inoxydable
325197659	2,0	Acier inoxydable
325197668	3,0	Acier inoxydable
325113122*	3,0	Acier inoxydable

* Seulement le rail sans protection et rondelle

ACCESSOIRES


Référence	Dénomination (mètre)	Matériau
325112959	Distance 20 mm	Acier inoxydable
325112960	Rondelle D 40 mm	Acier inoxydable
325112961	Protection de n	Plastique

RAIL FLEXIBLE (30X10 NORDIQUE)

Référence	Dénomination (mètre)	Matériau
325197797	3,0	Aluminium

ACCESSOIRES

Référence	Dénomination (mètre)	Matériau
182037412	Fixation murale avec distance	Aluminium
180901001P	Protection (10 pcs)	Plastique

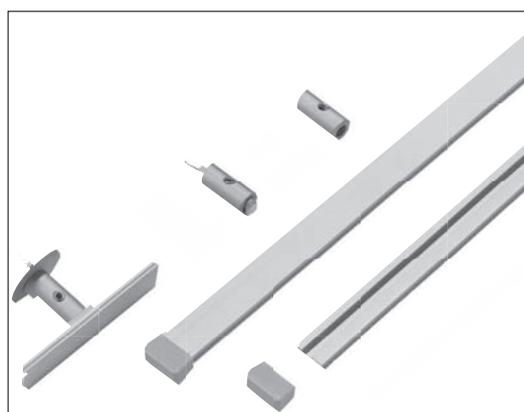

QUALITY MIX AIR/O2

MÉLANGEUR DE GAZ

Facile à régler, permet un mélange précis avec une consommation économique en gaz et un faible niveau de bruit. Le Quality Mix garantit un traitement optimal pour les nouveau-nés, les enfants et les adultes. La concentration en oxygène peut être réglée de manière précise et facile entre 21% et 100%. Une alarme de pression retentit s'il y a une interruption ou une chute de pression dans le système d'approvisionnement en gaz.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le Quality Mix fournit un mélange précis et continu d'air médical et d'oxygène pour les nourrissons, les enfants et les adultes.
- La concentration exacte d'O₂ est facile à régler et un robinet de purge en option permet une très faible consommation de gaz, même avec des débits inférieurs à 3 l/min.
- La concentration d'oxygène délivrée peut être affichée sur le moniteur d'oxygène en option
- Possibilité de fixer des limites avec alarmes pour s'assurer de toujours fournir la bonne concentration d'oxygène
- Possibilité de configurer votre appareil selon vos besoins spécifiques grâce à un système modulaire sophistiqué comprenant un module de détente, des accroches aux rails, plusieurs débitmètres et des silencieux.

INSTALLATION COMPLÈTE

La large gamme de produits GCE comme les détendeurs, les soupapes mixtes et les tuyaux basse pression, est disponible pour simplifier davantage l'installation.

BOÎTIER ROBUSTE

Un boîtier métallique robuste protège l'appareil contre les dommages, en particulier dans des conditions cliniques difficiles.

MONITEUR D'OXYGÈNE

La concentration d'oxygène délivrée peut être affichée sur le moniteur d'oxygène en option.



Code	Produit	Détails techniques	Statut de livraison
0727800	Unité de base mélangeur bas débit O ₂ /Air	Bas débit, entrée : NIST sortie : 9/16 Détails ext. voir données tech.	conditionné dans la boîte du mélangeur avec de la place pour des accessoires, y compris le manuel choisi
0727801	Unité de base mélangeur haut débit O ₂ /Air	Haut débit, entrée : NIST sortie : 9/16 Détails ext. voir données tech.	

DONNÉES TECHNIQUES

Type de mélangeur		Haut débit		Bas débit	
Principale sortie de débit (l/min)		15-120		3-30	
Débit de sortie auxiliaire (l/min)		2-100		0-30	
Débit maximum combiné - de toutes les sorties (l/min)		>120		>30	
Débit de purge à 3,4 bar (l/min)		<13		< 3	
Débit d'urgence (si dysfonctionnement de l'air ou de l'oxygène)		<85		<15	
Baisse de pression au niveau de la pression d'entrée de 3,1 à 5,2 bar avec un débit de 10l/min / 30l/min à 60% FIO ₂		<0,21		<0,14	
L'alarme retentit lorsque la pression d'alimentation baisse (bar)	Sans module de détente	on 3,3	off 4,2	on 3,3	off 4,2
	Avec module de détente	on 2,3	off 3,2	on 2,3	off 3,2
Volume de l'alarme		> 80dB à une distance de 30cm			
Plage de réglage de la concentration d'oxygène		21-100%			
Pression d'entrée du gaz		4,5±0,5 bar: la différence de pression d'air et d'oxygène doit être inférieure à 0,7 bar			
Précision du mélange de gaz		± 3% oxygène			
Types de raccord		Entrées et sorties DISS pour oxygène et/ou entrées NIST pour Air et oxygène			
Dimensions (LxIxH)		130x165x122mm			
Poids		1600g			
Température de fonctionnement		+5°C à +40°C			
Température de stockage		-20°C à +60°C			
Humidité		Max.95% sans condensation			

ACCESSOIRES

Code	Produit	Détails techniques	Statut de livraison
0727802	Module de purge	Sortie 9/16", coprs aluminium	monté sur le détendeur
0727803	Module de détente	équilibrage des pressions d'entrée de 3,2-7,0bar	monté sur le détendeur
0727804	Module du moniteur avec capteur et câblage	incl. câble en spirale max 1,8 mètre de long et capteur O ₂	monté sur le détendeur, choisir le manuel
0727805	Support pour moniteur O ₂ externe	aluminium	emballé avec le mélangeur ou en boîte de commande seule
0727806	Raccord mélangeur	Pièce en T: 9/16 int. sortie 9/16 ext., point capteur int. 14,7mm	pemballé avec le mélangeur ou en boîte de commande seule
0727807	Support du mélangeur pour rails 25mm	pour rails de 25mm, accroche 45x32x7,5mm, profondeur 44mm, aluminium	emballé avec le mélangeur ou en boîte de commande seule
0727808	Support du mélangeur pour rails 25-50mm et tube	pour rails de 25-50mm et tubes de 17-40mm, profondeur 76mm, aluminium	emballé avec le mélangeur ou en boîte de commande seule
0727809	Débitmètre 0-3lpm	entrée: 9/16 int., sortie: 9/16 ext., corps aluminium, tubes en polysulfone	emballé avec le mélangeur ou en boîte de commande seule
0727810	Débitmètre 0-6lpm	entrée: 9/16 int., sortie: 9/16 ext., corps aluminium, tubes en polysulfone	emballé avec le mélangeur ou en boîte de commande seule
0727811	Débitmètre 0-16lpm	0-16lpm, entrée: 9/16 int., sortie: 9/16 ext., corps aluminium, tubes en polysulfone	emballé avec le mélangeur ou en boîte de commande seule
0727812	Débitmètre 3,2-32lpm	3,2-32lpm, entrée: 9/16int., sortie: 9/16ext., corps aluminium, tubes en polysulfone	emballé avec le mélangeur ou en boîte de commande seule
0727813	Débitmètre 8,5-85lpm	8,5-85lpm, entrée: 9/16int., sortie: 9/16ext., corps aluminium, tubes en polysulfone	emballé avec le mélangeur ou en boîte de commande seule
0727814	Silencieux pour débitmètre 22mm	pour tuyaux de ventilation de 22 mm, corps en polyamide	emballé avec le mélangeur ou en boîte de commande seule
0727815	Silencieux pour débitmètre 9/16"	9/16" sortie pour tuyaux patient, corps en polyamide	emballé avec le mélangeur ou en boîte de commande seule
0727816	Capteur O ₂ pour moniteur (pièce d'usure)	consommable	emballé avec le mélangeur ou en boîte de commande seule
0727817	Notice d'utilisation (NU) du mélangeur langues EU Centrale et du Sud	Langues: DE, EN, FR, IT,ES, PT, NL, EL Grec	1 version sélectionnée avec mélangeur
0727818	NU du mélangeur langues EU du Nord	Langues: IS, DA, SV, NO, FI, LV, LT, ET	1 version sélectionnée avec mélangeur
0727819	NU du mélangeur langues EU de l'Est	Langues: PL, SL, SK, HU, HR, CS, BG, RO, CNR	1 version sélectionnée avec mélangeur
0727820	NU du mélangeur langues Amérique et Asie	Langues: PT-BR, EN, FR, JA, KO, ZH, TR, RU	1 version sélectionnée avec mélangeur
0727821	NU du moniteur langues EU Centrale et du Sud	Langues: DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, EL Grec	1 sélectionné avec mélangeur et moniteur
0727822	NU du moniteur langues EU du Nord	Langues: IS, DA, SV, NO, FI, LV, LT, ET	1 sélectionné avec mélangeur et moniteur
0727823	NU du moniteur langues EU de l'Est	Langues: PL, SL, SK, HU, HR, CS, BG, RO, CNR	1 sélectionné avec mélangeur et moniteur
0727824	NU du moniteur langues Amérique et Asie	Langues: PT-BR, EN, FR, JA, KO, ZH, TR, RU	1 sélectionné avec mélangeur et moniteur


DÉTENDEURS HAUTE PRESSION




LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE DÉTENDEURS DE GAZ MÉDICAUX HAUTE PRESSION

MEDISELECT® II

- Détendeur avec débitmètre
- Manomètre rotatif pour une lecture facilitée de la pression
- Sortie du débit rotative à 360° afin de permettre une meilleure orientation de la tubulure d'oxygénothérapie vers le patient (évitant ainsi toute torsion)
- Innovation sécurité : dispositif de réglage des débits conçu pour délivrer le gaz, même entre deux positions
- Lecture frontale et latérale des valeurs de débit
- Un nombre plus important de valeurs de débit
- Conçu pour une pression d'entrée de 300 bar
- Nouveau type de manomètre, avec une résistance éprouvée aux chocs

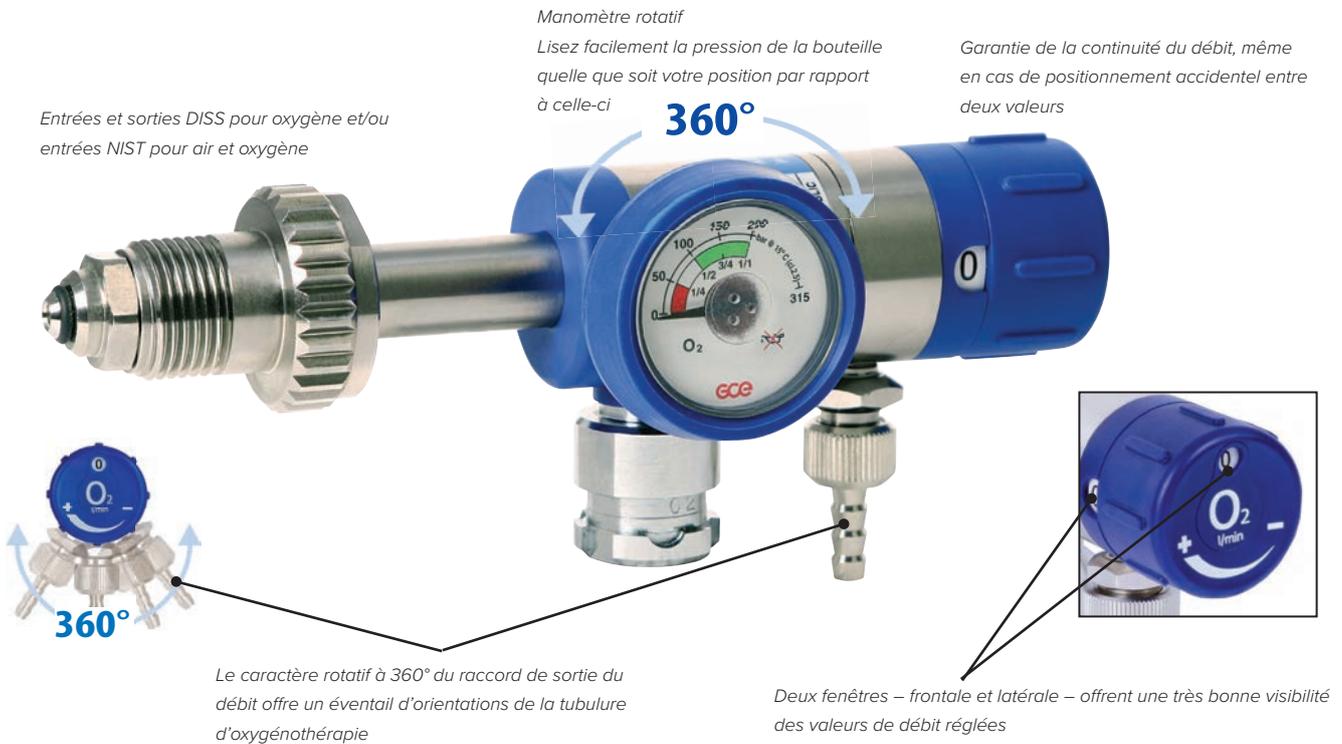

COURBE DES DÉBITS D'OXYGÈNE (PRESSION DE SORTIE P2 = 4 BAR)

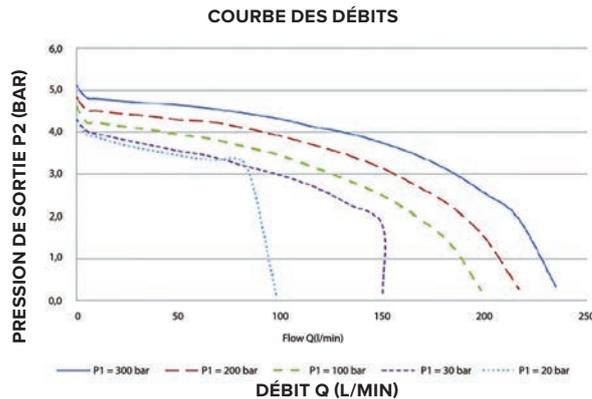

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE DÉTENDEURS DE GAZ MÉDICAUX HAUTE PRESSION

MEDIREG® II

- Détendeur avec pression de sortie à pression fixe
- Manomètre rotatif pour une lecture facilitée de la pression
- Design ergonomique
- Facile à nettoyer
- Compact et facile d'utilisation
- Léger



DÉTENDEURS HAUTE PRESSION MEDISELECT® II ET MEDIREG®

DÉTENDEURS-DÉBITMÈTRES ET DÉTENDEURS À PRESSION FIXE

DÉTENDEURS-DÉBITMÈTRES



0720164



0720152



0724135



0724129

Référence	Désignation
0720165	MEDISELECT® II - 2 l/min O ₂ (raccord à visser) type F
0720151	MEDISELECT® II - 6 l/min O ₂ (raccord à visser) type F
0720150	MEDISELECT® II - 15 l/min O ₂ (raccord à visser) type F
0720152	MEDISELECT® II - 15 l/min O ₂ (à étrier) type F
0720164	MEDISELECT® II - 15 l/min O ₂ avec prise (raccord à visser) type F
0720163	MEDISELECT® II - 15 l/min AIR avec prise (raccord à visser) type D
0720166	MEDISELECT® II - 15 l/min O ₂ /N ₂ O avec prise (raccord à visser) type L
0720255	MEDISELECT® II - 15 l/min N ₂ (raccord à visser) type C

DÉTENDEURS MEDIREG® II A PRESSION FIXE DE 4 BAR

Référence	Désignation
0724135	MEDIREG® II O ₂ - raccord à visser - manomètre à droite du raccord, type F
0724129	MEDIREG® II O ₂ - raccord à étrier - manomètre à gauche du raccord, type F
0724144	MEDIREG® II O ₂ - raccord à étrier - manomètre à droite du raccord type F
0724145	MEDIREG® AIR - raccord à visser - manomètre à droite du raccord type D
0724147	MEDIREG® N ₂ O - raccord à visser - manomètre à droite du raccord type G

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Types de raccords d'entrée disponibles :	oxygène (F), air médical (D), protoxyde d'azote (G) mélange équimolaire oxygène / protoxyde d'azote (L)
Plage de pressions d'entrée :	jusqu'à 300 bar
Pression de sortie nominale :	4 bar
Plages des débits :	
0 à 2 l/min	0 ; 0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,4 ; 0,5 ; 0,6 ; 0,7 ; 0,8 ; 1 ; 1,5 ; 2
0 à 6 l/min	0 ; 0,25 ; 0,5 ; 0,75 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6
0 à 15 l/min	0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 9 ; 12 ; 15
Raccord d'entrée :	selon norme AFNOR
Raccord de sortie débit :	M 12x1,25 avec olive de sortie
Raccord de sortie pression :	prise crantée selon norme NFS 90-116
Matériau du corps :	laiton nickelé aspect satiné
Volant de réglage :	polyamide
Joints toriques :	EPDM
Filtre :	bronze fritté
Bonnette de manomètre :	TPE (élastomère thermoplastique)
Garantie :	2 ans
Révision :	à 5ans
	Conforme à la directive sur les dispositifs médicaux n°93/42/C.E.E.
	Conforme à la norme EN 10524-1
Statut réglementaire :	(Détendeurs haute pression pour gaz à usage médical)
	Conforme à la norme EN 1789:2000
	(véhicules médicaux et leurs équipements – ambulances)

*débits exprimés à 23°C et 101,3 kPa

PIÈCES DÉTACHÉES POUR RACCORDS D'ENTRÉE

Référence	Désignation
9438080	Lot de 10 joints pour raccord à visser de détendeur
9421560	Lot de 10 joints pour raccord à étrier de détendeur



MEDISELECT® II
0720150



MEDISELECT® II
0720152



MEDISELECT® II
0720164



MEDIREG® II
0724135



Flexible
0731003



MEDIFLOW® ULTRA II
0728184



*Pack pour fixation bouteille
(livré sans bouteille)*



ÉCONOMISEZ 3 FOIS PLUS D'OXYGÈNE COMPARÉ AU SYSTÈME CLASSIQUE EN DÉBIT CONTINU GRÂCE À L'ÉLITE OU À L'ÉCOLITE 4000

ELITE

Durant l'expiration, l'oxygène est collecté dans un réservoir. Au début de l'inhalation, la membrane détecte une pression négative dans le nez. Ceci ouvre la valve qui délivre l'oxygène au patient au début de sa respiration.

L'oxygène délivré correspond à la méthode de débits constants classiques. Le système Elite ajuste automatiquement la quantité d'oxygène délivrée selon le mode de débit défini. Pour des débits importants, l'oxygène sera collecté rapidement. Le patient aura de nombreuses petites pulsions d'oxygène.

Pour des débits modérés, il faut plus de temps à l'oxygène pour arriver. Le patient aura de plus longues pulsions d'oxygène mais moins nombreuses.

Une manière simple de mesurer les économies d'oxygène est de regarder l'efficacité du système. L'efficacité est calculée par division de l'oxygène délivré aux poumons du patient et le débit moyen. Avec le système classique de débit continu, seule une petite quantité d'oxygène arrive aux poumons où il peut être absorbé. Environ 60% à 80% de l'oxygène délivré est perdu.

LES RAISONS À CELA SONT :

- Le débit continu ne s'arrête pas lors de la phase d'expiration, donc 2/3 du gaz est perdu dans l'atmosphère.
- Le débit continu administre le gaz avec malheureusement des zones d'ombres.

Le système Elite délivre plus efficacement le gaz (90% à 70% d'efficacité).

La pulsion d'oxygène est envoyée lors du début de la respiration et se mélange avec l'air pour être absorbé par les poumons.

Le système Elite économise le gaz lors de l'inhalation (évite les zones d'ombres) et lors de l'expiration.

Les économies de gaz dépendent du débit choisi ainsi que du patient.



Capacité bouteille (litre)	Pression (bar)	Mode débit équivalent (l/min)				
		1	2	3	4	5
0.5	137	3:25	1:42	1:08	0:51	0:34
1.5	137	6:51	3:25	2:17	1:42	1:08
1.7	137	11:38	5:49	3:52	2:54	1:56
2.0	137	13:42	6:51	4:34	3:25	2:17
2.7	137	18:29	9:14	6:90	4:37	3:40
9.4	137	64:35	32:17	21:31	16:08	10:45
0.5	200	5:00	2:30	1:40	1:15	0:50
1.0	200	10:00	5:00	3:20	2:30	1:40
1.7	200	17:00	8:30	5:40	4:15	2:50
2.0	200	20:00	10:00	6:40	5:00	3:20
2.7	200	27:00	13:30	9:00	6:45	4:30
9.4	200	94:17	47:80	31:26	23:34	15:43



ELITE



2001638



2001641



L'Elite est relié à une bouteille avec détendeur débitlitre intégré



DÉTENDEURS-DÉBITMÈTRES À ÉCONOMISEUR INTÉGRÉ

ELITE est un détendeur-débitmètre d'oxygène innovant dont l'économiseur intégré permet de prolonger la durée d'utilisation de la bouteille. ELITE est tout particulièrement apprécié par les patients sous oxygénothérapie à domicile, car il leur permet d'augmenter leur autonomie en phase de déambulation. Grâce à la précision de son système de dosage, les bouteilles d'oxygène peuvent durer environ trois fois plus longtemps que les détendeurs sans économiseur, et cela sans conséquence sur la qualité de la thérapie.

ELITE propose des avantages majeurs :

- > Facile de manipulation : raccorder le détendeur à la bouteille, ouvrir celle-ci, ajuster le débit souhaité et le patient est prêt à partir.
- > Pas de piles requises. Le mode pneumatique présente l'avantage de ne dépendre d'aucune autre source d'énergie que le gaz de la bouteille. Des économies budgétaires sont possibles tout en supprimant les sources potentielles d'erreurs. Maintenance requise 5 ans après la date de fabrication.
- > Le manomètre rotatif permet une lecture aisée sous tous les angles.
- > Pas de masques spéciaux coûteux. L'utilisation d'un masque d'oxygénothérapie standard suffit.
- > La légèreté du dispositif (580 g), la simplicité de mise en œuvre et la robustesse du design offre aux patients une ergonomie optimale en utilisation quotidienne, avec un maximum de confort.

Référence	Désignation
2001641	Robinet à détendeur intégré ELITE entrée 17E - Raccord Remplissage G1/4 MALE
2001636	Détendeur-Débitmètre Elite - Raccord d'entrée O ₂ TYPE F
2001635	Détendeur-Débitmètre Elite - Raccord d'entrée O ₂ TYPE BSI
2001638	Détendeur-Débitmètre Elite - Raccord d'entrée O ₂ TYPE DIN
2001637	Détendeur-Débitmètre Elite - Raccord d'entrée O ₂ TYPE ETRIER
2001640	Détendeur-Débitmètre Elite - Raccord d'entrée O ₂ TYPE US (CGA 540)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Pression d'entrée :	200 bar
Manomètre :	pour une pression de remplissage de 200 bar
Plage de réserve du manomètre :	20% de la pression de remplissage
Valeurs de débit :	1 / 1.2 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 l/min
Seuil d'ouverture de la soupape :	7 bar
Type de raccord d'entrée :	tous standards
Raccord de sortie :	cannelé universel
Garantie :	2 ans
Révision :	obligatoire à 5 ans

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Dimensions	Type de bouteilles
14090535	Elite - Sacoche de transport	49×22×15 cm	2 L
14090631	Elite - Chariot de transport	49×22.5×13cm	2 L



VARIMED



0729006



DÉTENDEUR DE BOUTEILLE, À PRESSION RÉGLABLE, SIMPLE ÉTAGE

Instrument de détente des gaz médicaux en bouteille. Détendeur haute pression à simple étage pour la réduction de la pression à une pression d'utilisation constante, afin d'alimenter canalisations ou instruments.

VARIMED, LE CHOIX DE :

LA SÉCURITÉ

Conception limitant les risques liés à la manipulation des gaz haute pression :


- > Corps en laiton chromé
- > Soupape de sur-pression
- > Filtre sur boîte à clapet

LA PERFORMANCE

- > Débit élevé
- > Bonne résistance au givrage à forts débits de gaz liquéfiés

Référence	Désignation
0729006	VARIMED 0-12 bar - type C (gaz neutres) - sortie olive 1/4'
0729007	VARIMED 0-12 bar - type D (air) - sortie prise crantée
0729009	VARIMED 0-12 bar - type F (oxygène) - sortie prise crantée
0729011	VARIMED 0-6 bar - type G (N ₂ O) - sortie prise crantée
9419740	VARIMED Olive G1/4' (pour Varimed réf. 0729006) - lot de 10
9419830	VARIMED Joint pour olive G1/4' - lot de 10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Gaz :	Tous gaz non corrosifs
Pression amont :	200 bar maxi
Pression aval :	N ₂ O : réglable de 0 à 6 bar Autres gaz : réglables de 0 à 12 bar
Précision des pressions :	± 10%
Manomètres :	Classe 2.5 – Event arrière conforme à l'EN 562. Plage d'affichage : de 0 à 10 ou 0 à 16 bar
Débit nominal :	15 Nm ³ /h avec P1 = 20 bar et P2 = 10 bar
Soupape de sécurité :	A rappel automatique Pression d'ouverture : 20 bar
Membrane :	Pression d'éclatement : 35 bar - 55 bar
Raccords bouteille :	Normalisés NF EN 738-1
Raccords de sortie :	1/ Prise crantée à simple clapet normalisée NFS 90 116 ou 2/ Olive crantée monobloc, déconnectable, G1/4' femelle
Poids :	1.5 kg
Dimensions :	Version avec prise : 100 H × 188 L × 126 P mm Version avec olive : 115 H × 188 L × 126 P mm Manomètres : Ø 50 mm
Garantie :	2 ans
Révision :	obligatoire à 5ans

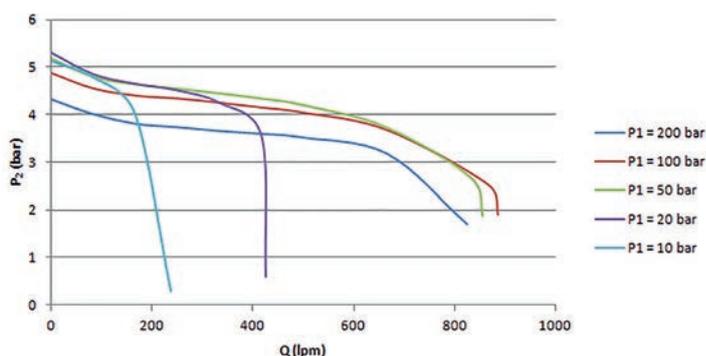

MEDICAL MULTISTAGE REGULATOR (MMR)



Le MMR est un détendeur de bouteilles à double étage qui fournit une pression de sortie stable. Le détendeur est conçu avec une compensation automatique de la chute de pression progressive dans une bouteille de gaz lorsque le gaz est utilisé.

Le détendeur convient aux applications à haut débit. Un domaine d'application optimal pour le MMR est lorsque la réserve de la bouteille de gaz sera utilisée, via le moniteur de pression ou le contrôle de pression, en cas de coupure de l'approvisionnement en gaz. Le MMR donne une pression stable et uniforme nécessaire pour certaines applications de gaz médicaux.

Le détendeur est disponible pour l'air médical, l'oxygène médical et l'air instrumental et a une pression de travail pré-réglée. Une soupape de sécurité protège l'équipement de la surpression. Le MMR est un produit de haute performance technique et fiable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	2400 g
Pression	30 m ³ /h à P1 = 200 bar (20 000 kPa) et P2 = 5 bar (500 kPa)
Sortie	Selon la norme SS 8752430



DOMICILE



CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE PORTABLE

ZEN-O LITE™

Le Zen-O lite™ est un concentrateur d'oxygène ultra-portable pour les patients avec un mode de vie actif.



SIMPLE. PORTABLE. FIABLE.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

MODE PULSÉ, JUSQU'À 1050 ML

Le Zen-O *lite*™ délivre jusqu'à 1050 ml par minute d'oxygène en mode pulsé et dispose de 5 réglages. Contrairement à d'autres dispositifs qui ne délivrent qu'une quantité fixe d'oxygène pour chaque réglage, le Zen-O *lite*™ ajuste automatiquement la quantité d'oxygène délivrée pour répondre à la fréquence respiratoire du patient.

SIMPLE ET FACILE D'UTILISATION

Le Zen-O *lite*™ a été conçu en pensant aux patients, il est simple d'utilisation avec des boutons intuitifs et son écran LCD.

LÉGER

Pesant à peine 2,5 kg, le Zen-O *lite*™ peut être utilisé dans le confort de la maison d'un patient et est idéal pour une utilisation à l'extérieur. Le Zen-O *lite*™ offre une autonomie inégalée et de la flexibilité pour les patients qui nécessitent un apport supplémentaire d'oxygène.

DÉTECTEUR DE RESPIRATION

L'indicateur lumineux clignote à chaque fois que le patient respire afin de lui assurer que l'oxygène est bien délivré.

TAMIS FACILEMENT REMPLAÇABLE

Le design pratique du Zen-O *lite*™ rend le remplacement du tamis très facile pour l'utilisateur ou le fournisseur (moins de 5 minutes).

ALARME

Le Zen-O *lite*™ a plusieurs alarmes sonores et visuelles afin d'alerter l'utilisateur lorsqu'une manipulation est nécessaire.

ADAPTÉ POUR LES TRANSPORTS AÉRIENS

Le Zen-O *lite*™ est adapté pour les transports aériens et satisfait toutes les normes de sécurité internationales.

Publication au Journal Officiel de la République Française du 18 avril 2019 NOR : SSAS1909781V avec une codification au LPPR : 1119789.



ZEN-O LITE™

L'oxygénothérapie de longue durée (OLD), est une méthode de soins pour de nombreux patients qui sont atteints d'hypoxémie chronique stable, souvent causée par des troubles respiratoires (1). Le Zen-O lite™ de GCE Healthcare est un concentrateur d'oxygène portable qui fournit de l'oxygène aux patients, chez lui ou lors de ses déplacements, ce qui leur permet de continuer à vivre une vie active.

Le Zen-O lite™ doit être utilisé avec une canule haut débit de 15 l/min.



RS-00606



RS-00619



RS-00601



Alimentation AC



Alimentation DC



Chargeur de batterie externe



Références	Désignation
RS-00608-G-S	Zen-O lite™ Concentrateur avec 1 batterie de 8 cellules
RS-00608-G-D	Zen-O lite™ Concentrateur avec 2 batteries de 8 cellules
RS-00601	Batterie rechargeable
RS-00602	Alimentation AC avec câble EU
RS-00603	Alimentation AC avec câble UK
RS-00604	Alimentation AC avec câble US
RS-00605	Chargeur allume-cigare
RS-00606	Sac de transport
RS-00616	Modules de remplacement des tamis (la paire)
RS-00617	Clé à canule
RS-00619	Sac à dos
RS-00512	Filtre canule patient lot de 10
RS-00624	Filtre bactérien lot de 3
RS-00616	Tamis moléculaire
RS-00515	Chargeur de batterie externe - US
RS-00516	Chargeur de batterie externe - EU
RS-00517	Chargeur de batterie externe - UK
MM6012	Canule nasale O2 haut débit (adulte), 2,1 m, 0 à 15 l/min. Sans DEHP. (lot de 25)

Chaque dispositif Zen-O lite™ est livré avec un sac de transport, la batterie, un manuel d'utilisation et les câbles d'alimentation AC/DC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Poids:	2.5 kg (5.5 lbs) sans sac de transport
Ampérage:	AC Adaptateur: 100-240V AC(+/- 10%) 50-60 Hz entrée, 24V DC, 5.0A sortie DC Adaptateur: 11.5 - 16V DC entrée, 19V, 6.3A sortie
Pureté:	87% - 96% à tous les réglages
Pression maximale de l'oxygène:	20.5 psi
Pression de déclenchement	-0.12cm/H ₂ O
Taux d'humidité:	5% à 93% ± 2% sans condensation
Température:	
Fonctionnement:	5°C (41°F) et 40°C (104°F)
Stockage:	-20°C (-4°F) et 60°C (140°F)
Réglages:	Réglage par tranche de 0.5 de 1.0 à 5.0
Niveau sonore:	38 dB(A)*
Altitude de fonctionnement:	0' à 13000' (0m à 4,000) par rapport au niveau de la mer, 1060 à 575 mbar
Durée batterie:	Approx. 4 heures*

*en mode pulse réglage 2.

TABLEAUX ZEN-O LITE™

TAILLE DU BOLUS EN MODE PULSÉ (ML/RESPIRATION) SELON LE RÉGLAGE ET LA FRÉQUENCE RESPIRATOIRE

Respirations par minute	Réglage				
	1	2	3	4	5
15	11	22	33	44	55
20	11	22	33	44	52.5
25	11	22	33	42	42
30	11	22	33	35	35
35	11	22	30	30	30
40	11	22	26.5	26.25	26.25

Toutes les valeurs +/- 15 % dans toutes les conditions de fonctionnement.

CYCLES DE DÉCHARGE DE LA BATTERIE

Réglage	Durée de vie approx. de la batterie (heures:minutes)
Pulse 1,0*	4:00
Pulse 2,0*	4:00
Pulse 3,0*	3:00
Pulse 4,0*	2:15
Pulse 5,0*	2:00

* (18 rpm). Des batteries de remplacement sont disponibles chez des distributeurs autorisés.



CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE TRANSPORTABLE

ZEN-O™

Zen-O™ est un concentrateur d'oxygène portable, fournissant de l'oxygène au patient, chez lui ou lors de ses déplacements.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

MODE DOUBLE

Zen-O™ fournit au patient le meilleur des deux mondes : il peut alterner entre une thérapie par flux continu et une thérapie par oxygène pulsé.

SIMPLE ET FACILE D'UTILISATION

Zen-O™ a été conçu en pensant au patient, il est simple d'utilisation avec des boutons intuitifs et son écran LCD.

SENSIBLE AUX BESOINS DES PATIENTS

En utilisant une technologie brevetée de pointe, le Zen-O™ peut fournir jusqu'à 2l/mn d'oxygène en réponse aux besoins du patient. Contrairement à d'autres dispositifs qui délivrent un débit fixe d'oxygène, le Zen-O™ augmente automatiquement la quantité d'oxygène délivrée, en fonction du besoin du patient.

DURABLE ET FIABLE

Le Zen-O™ est robuste et est livré avec une garantie de 3 ans ou 15 000 heures d'utilisation totale, assurant une qualité et une fiabilité du produit.

Publication au Journal Officiel de la République Française du 28 juin 2017 NOR : SSAS1718951A avec une codification au LPPR : 1103297.

FABRIQUÉ SELON LES NORMES LES PLUS RIGOREUSES

Le Zen-O™ est fabriqué au Royaume-Uni et aux Etats-Unis selon les normes strictes des directives européennes des dispositifs médicaux, de l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux ainsi que de la Federal Aviation Agency des Etats-Unis.

TAMIS FACILEMENT REMPLACABLE

Le Zen-O™ a été conçu avec des tamis moléculaires qui peuvent être remplacés facilement par la plupart des fournisseurs de soins à domicile, sans avoir à renvoyer l'appareil à un distributeur.

ALARME

Le dispositif a été conçu avec différentes alarmes sonores et visuelles : batterie faible, pas d'inspiration détectée, pureté de l'oxygène faible.



CONCENTRATEURS D'OXYGÈNE PORTABLE

ZEN-O™

L'oxygénothérapie de longue durée (OLD), est une méthode de soins pour de nombreux patients qui sont atteints d'hypoxémie chronique stable, souvent causée par des troubles respiratoires⁽¹⁾. La durée et la qualité de vie des patients, sont améliorées en proportion de la durée de traitement à l'oxygène⁽²⁾. Le Zen-O™ doit être utilisé avec une canule haut débit de 15 l/min.



RS-00502-G-S



RS-00509



RS-00509



RS-00507



RS-00501



Zen-O™ peut contenir jusqu'à 2 batteries de 12 cellules

Références	Désignation
RS-00502-G-S	Zen-O™ concentrateur 1 batterie
RS-00502-G-D	Zen-O™ concentrateur 2 batteries
RS-00501	Batterie 12 cellules
RS-00509	Sac de transport
RS-00536	Sac à dos
RS-00507	Chariot de transport
RS-00508	Chargeur allume-cigare
RS-00511	Clé à filtre
RS-00512	Filtre canule patient lot de 10
RS-00526	Filtre bactérien lot de 6
RS-00513	Tamis moléculaire
RS-00515	Chargeur de batterie externe - US
RS-00516	Chargeur de batterie externe - EU
RS-00517	Chargeur de batterie externe - UK
RS-00520	Alimentation AC avec cordon EU
RS-00521	Alimentation AC avec cordon UK
RS-00522	Alimentation AC avec cordon US
RS-00523	Sac de rangement pour accessoires
MM6012	Canule nasale O2 haut débit (adulte), 2,1 m, 0 à 15 l/min. Sans DEHP. (lot de 25)

Chaque dispositif Zen-O™ est livré avec un sac de transport, la batterie, les câbles d'alimentation AC / DC et un chariot.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions (LxlxH):	212 mm × 168 mm × 313 mm (8.3" × 6.6" × 12.3")
Poids:	4.66kg avec une batterie 12 cellules
Ampérage:	Adaptateur AC: 100-240V AC(+/- 10%) 50-60 Hz entrée, 24V DC, 6.25A sortie Adaptateur DC: 11.5 - 16V DC entrée, 19V, 7.9A sortie
Pureté:	87% - 96% à tous les réglages
Pression maximale de l'oxygène:	20.5 psi
Pression de déclenchement:	-0.12cm/H ₂ O
Taux d'humidité:	5% à 93% ± 2% sans condensation
Température:	
Fonctionnement:	5°C (41°F) et 40°C (104°F)
Stockage:	-20°C (-4°F) et 60°C (140°F)
Réglage:	Réglage par tranche de 0.5 de 1.0 à 6.0 en mode pulsé et de 0.5 à 2.0 en mode continu.
Niveau sonore:	38dB (A) testé selon les méthodes de l'audition 14-1 03/2007 MDS-Hi* 42dB (A) testé selon l'ISO 3744*
Alarmes de sécurité et autres:	Pureté de l'oxygène faible Pas d'inspiration détectée Batterie faible Service requis
Durée batterie:	Approximativement 4 heures avec une batterie simple, ou 8 heures avec 2 batteries à 18 RPM

* en mode pulsé réglage 2.

LE PRODUIT DÉCRIT DANS CETTE FICHE RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE.



Alimentation AC et DC



Chargeur de batterie externe



TABLEAUX

TAILLE DU BOLUS EN MODE PULSÉ (ML/RESPIRATION) SELON LE RÉGLAGE ET LA FRÉQUENCE RESPIRATOIRE

Respirations par minute	Réglage					
	1	2	3	4	5	6
15	11	22	33	44	55	66
20	11	22	33	44	55	66
25	11	22	33	44	55	66
30	11	22	33	44	55	66
35	11	22	33	44	55	57
40	11	22	33	44	50	50

Toutes les valeurs +/- 15 % dans toutes les conditions de fonctionnement.

DÉBIT EN MODE APPORT CONTINU (L/MIN) PAR RAPPORT AU RÉGLAGE

Réglage	Débit
0.5	0.5
1.0	1.0
1.5	1.5
2.0	2.0

Toutes les valeurs +/- 0,2 l dans toutes les conditions de fonctionnement.

CYCLES DE DÉCHARGE DE LA BATTERIE

Réglage	Durée de vie approx. de la batterie 1 batterie installée (heures:minutes)	Durée de vie approx. de la batterie 2 batteries installées (heures:minutes)
Pulse 1,0*	4:00	8:00
Pulse 2,0*	4:00	8:00
Pulse 3,0*	3:00	6:00
Pulse 4,0*	2:15	4:30
Pulse 5,0*	2:00	4:00
Pulse 6,0*	1:45	3:30
Cont. 0,5	3:00	6:00
Cont. 1,0	1:45	3:30
Cont. 1,5	1:15	2:30
Cont. 2,0	0:45	1:30

* (18 rpm). Des batteries de remplacement sont disponibles chez des distributeurs autorisés.



ÉCONOMISEUR ÉLECTRONIQUE D'OXYGÈNE

ECOLITE® 4000

ECOLite® 4000 est un économiseur électronique d'oxygène médical, qui permet un traitement convivial et efficace en oxygénothérapie de longue durée.

- Avec l'ECOLite® 4000, l'oxygène est administré seulement pendant la phase inspiratoire, permettant d'économiser jusqu'à dix fois le gaz utilisé en comparaison avec le système à débit continu. Le volume d'oxygène nécessaire pour un cycle respiratoire est fourni pendant le premier tiers de l'inspiration, ce qui garantit à la fois un traitement efficace et optimal ainsi qu'une brève exposition de la muqueuse nasale à l'oxygène et donc un assèchement limité.
- Une caractéristique spéciale de l'ECOLite® 4000 est le mini-détendeur intégré qui permet de se raccorder à une pression comprise entre 1.6 et 5 bar. La pression d'utilisation de l'ECOLite® 4000 est réglée à 1.6 bar pour une oxygénothérapie efficace d'un point de vue clinique et agréable sur le plan physiologique.
- Le dispositif présente deux modes opératoires : automatique & manuel. En mode automatique, la quantité d'oxygène délivrée s'accroît en relation avec le débit sélectionné, à des taux de 15 à 30 inspirations-expirations par minute, jusqu'à un maximum de 8 l/min. En mode manuel, les débits peuvent être sélectionnés tous les 0.5 l/min et couvrent une plage de 0.5 à 8 l/min.
- Si un débit spécifique est prescrit par le praticien, les valeurs souhaitées peuvent être verrouillées par le personnel soignant du prestataire de maintien à domicile, lors de la mise en route initiale.



- L'économiseur comporte plusieurs alarmes pour une utilisation sûre. Les alarmes sont à la fois audibles et visibles sur l'écran.
- Celles-ci indiquent :
 - La faiblesse de l'alimentation
 - l'absence d'oxygène
 - l'absence de respiration
- Le design robuste du produit lui permet d'avoir une durée de vie jusqu'à 10 ans. La durée de vie de la pile est de 200 heures. Celle-ci est d'un modèle standard AA 1.5 Volt. Le produit dispose d'une garantie de 2 ans.

ÉCONOMISEUR ÉLECTRONIQUE D'OXYGÈNE



BREVETÉ

CE 2460



CONSOMMABLES:

standard Pile R06, AA,
Alkaline 1.5 V




14090535

14090631

325112719

Mode automatique

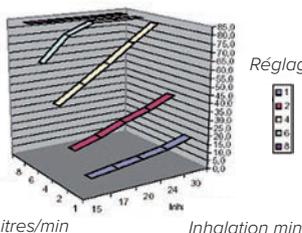

ECOLITE® 4000

ECOLITE est un économiseur électronique d'oxygène médical, qui permet un traitement convivial et efficace en oxygénothérapie de longue durée.

Avec l'ECOLITE, l'oxygène est administré seulement pendant la phase inspiratoire, permettant d'économiser jusqu'à dix fois le gaz utilisé en comparaison avec le système à débit continu. Le volume d'oxygène nécessaire pour un cycle respiratoire est fourni pendant le premier tiers de l'inspiration, ce qui garantit à la fois un traitement efficace et optimal ainsi qu'une brève exposition de la muqueuse nasale à l'oxygène et donc un assèchement limité.

Une caractéristique spéciale de l'ECOLITE® 4000 est le mini-détendeur intégré qui permet de se raccorder à une pression comprise entre 1.6 et 5 bar. La pression d'utilisation de l'ECOLITE® 4000 est réglée à 1.6 bar pour une oxygénothérapie efficace d'un point de vue clinique et agréable sur le plan physiologique.

Le dispositif présente deux modes opératoires : automatique & manuel. En mode automatique, la quantité d'oxygène délivrée s'accroît en relation avec le débit sélectionné, à des taux de 15 à 30 inspirations-expirations par minute, jusqu'à un maximum de 8 l/min. En mode manuel, les débits peuvent être sélectionnés tous les 0.5 l/min et couvrent une plage de 0.5 à 8 l/min.

Si un débit spécifique est prescrit par le praticien, les valeurs souhaitées peuvent être verrouillées par le personnel soignant du prestataire de maintien à domicile, lors de la mise en route initiale.

L'économiseur comporte plusieurs alarmes pour une utilisation sûre. Les alarmes sont à la fois audibles et visibles sur l'écran. Celles-ci indiquent :

- > La faiblesse de l'alimentation
- > l'absence d'oxygène
- > l'absence d'inhalation

La durée de vide de la pile (modèle standard AA 1.5 V) est de 200 heures.

Référence	Désignation / Standard
325197617	ECOLITE® 4000 / France
325112895	Flexible de connexion prise rapide pour Ecolite ref 325197617
325197545	ECOLITE complet

TUYAU SPIRALÉ D'ALIMENTATION :

Référence	Désignation
325112717	Type nordique
325112782	Type BSI
325112783	Type oxygène liquide 1.6 bar

ACCESSOIRES :

Référence	Désignation
14090535	Sac de transport pour bouteille B2
14090631	Chariot pour sac 14090535
325112719	Sacoche pour ceinture

PIÈCES DÉTACHÉES :

Référence	Désignation
325112670	Capot de pile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Performance fonctionnelle	Réglages :	Manuel / Automatique
	Déclenchement :	à chaque inspiration
	Sensibilité :	0.13 cm H ₂ O
	Pression de réglage :	1.6 bar
	Précision :	0.5-1.5 l/min +/-30% 2-8 l/min +/-15%
Source d'énergie	Pile :	RO6, AA, Alkaline 1.5 V
	Pression :	entre 1.6 & 5 bar
Source d'oxygène	Débit :	minimum 4 l/min
	Hauteur :	101 mm
	Largeur :	85 mm
Dimensions et poids	Profondeur :	32 mm
	Poids :	184 g sans la pile

ACCESSOIRES POUR OXYGÉNOTHÉRAPIE

AQUAPAK PACKS D'EAU STÉRILE



Les humidificateurs préremplis AQUAPAK® combinent un adaptateur facile à utiliser avec un choix de deux bouteilles de réservoir d'eau stérile.

- > sans latex
- > usage unique
- > emballé individuellement

Référence	Désignation
14090563	Aquapak 340 ml. Pack de 20
14090561	Aquapak 650 ml. Pack de 10

HUMIDIFICATEUR À USAGE UNIQUE



Référence	Désignation
14090417	Humidificateur à usage unique, 500 ml. Pack de 50

CANULE NASALE



Référence	Désignation
14112132	Canule nasale adulte (2.1m), embouts droits. Débit 1-7 LPM. Pack de 50
14090510	Canule nasale adulte (2.1m), embouts évasés. Débit 1-7 LPM. Pack de 50
14090513	Canule nasale adulte (2.1m). Débit 1-4 LPM. Pack de 50
MM6012	Canule adulte haut débit 7ft. Pack de 25pcs*
MM6013	Canule adulte haut débit 25ft. Pack de 10pcs*

* Compatible Zen-O™ et Zen-O lite™

TUBES DE RACCORDEMENT À L'OXYGÈNE



Référence	Désignation
14112138	Tube de raccordement 4.2 m
14090496	Tube de raccordement 7.5 m
14090495	Tube de raccordement 15 m

OLIVE COUDÉE POUR AQUAPAK



Référence	Désignation
14090526	Olive coudée 9/16 filetage mâle

HUMIDIFICATION ET FILTRATION

Échanges de chaleur et d'humidité pour la protection des patients, du personnel et des appareils contre la contamination croisée.

HUMID VENT 1 - ÉCHANGEUR DE CHALEUR ET D'HUMIDITÉ



Référence	Désignation
14112056	Échangeur de chaleur et d'humidité. Pack de 50

- > Volume courant 50 - 600 ml
- > Stérile
- > Papier bactériostatique avec rétention et restitution moyenne de l'humidité
- > Taux d'humidité délivrée 29 mg H₂O at V_T 300 ml

HUMID VENT 2



Référence	Désignation
14112064	Stérile, pack de 20
14112065	Propre, pack de 20

- > Volume courant 150 - 1500 ml
- > Taux d'humidité délivrée 28 mg H₂O at V_T 600 ml

HUMID VENT COMPACT



Référence	Désignation
14112077	Humid vent compact - Stérile (pack de 25)
14090608	Humid vent compact - Propre (pack de 25)

- > Design Compact
- > Volume courant 150 - 1000 ml
- > Taux d'humidité délivrée 30 mg H₂O at V_T 1000 ml

HUMID VENT FILTRE PEDI



Référence	Désignation
14112055	Humid Vent Pedi - Stérile (pack of 20)
14090606	Humid Vent Pedi - Stérile (pack of 20)

- > Convient aux patients pédiatriques
- > Design Compact

ACCESSOIRES POUR OXYGÉNOTHÉRAPIE

TRACH VENT



Référence	Désignation
14090610	Humid Vent Pedi - Stérile (pack de 20)

- > Stérile
- > Papier bactériostatique avec rétention et restitution moyenne de l'humidité
- > Convient aux adultes et aux enfants

SUPPORT POUR TRACH VENT



Référence	Désignation
14090613	Support pour Trach Vent. Pack de 30

TRACH-VENT+



Référence	Désignation
14112161	TRACH-VENT+ pack de 50

- > Stérile
- > Papier bactériostatique avec rétention et restitution moyenne de l'humidité
- > Perte d'humidité 8.4 mg H₂O/l à V_t 500 ml
- > Taux d'humidité délivrée 29.2 mg H₂O/l à V_t 500 ml

FILTRE ISO GARD



Référence	Désignation
14112076	Filtre ISO GARD - Stérile (pack de 25)
14090604	Filtre ISO GARD - Propre (pack de 25)

- > Raccords 22 M/15 F-15 M/22 F
- > Volume courant 150 - 1000ml
- > Filtre de profondeur hydrophobe
- > Résistance au débit : à 60 l/min, 1,6cm H₂O

FILTRE ISO GARD (PETIT)



Référence	Désignation
14112080	Filtre ISO GARD petit - Stérile (pack de 25)

- > Raccords 22 M/15 F-15 M
- > Volume courant 150 - 1000ml
- > Filtre de profondeur hydrophobe
- > Résistance au débit : à 60 l/min, 1,9 cm H₂O

ACCESSOIRES POUR OXYGÉNOTHÉRAPIE

ISO-GARD HEPA LIGHT



Référence	Désignation
14112089	ISO-GARD HEPA light - Propre. Pack de 20

- > Filtre de profondeur hydrophobe
- > Résistance au débit : 2.8 cm H₂O à 60 l/min

OXY-VENT AVEC TUBE



Référence	Désignation
14090612	Oxy-vent avec tube. Pack de 10

OXY-VENT SANS TUBE



Référence	Désignation
14090611	Oxy-vent sans tube. Pack of 20

URGENCE



VALVE À LA DEMANDE

EASE II

La valve à la demande EASE II constitue un dispositif médical compact pour l'auto administration du mélange gazeux O₂/N₂O pour le soulagement de la douleur ou l'oxygénothérapie. EASE II est conçue de façon à diminuer au maximum l'effort inspiratoire du patient et peut délivrer de forts débits si besoin. Pour une meilleure utilisation, EASE II est plus petite et légère que la version originale Sabre EASE.

Le design spécial de la poignée est également un plus dans l'utilisation.

- A la demande le système peut délivrer jusqu'à 300l/min d'oxygène ou de protoxyde d'azote oxygène (Meopa : Entonox, Kalinox, Antasol, etc)
- Une version adaptée pour bouteille dans la cadre d'utilisations en hôpital ou ambulance
- Version à basse pression pour l'obstétrique, les soins infirmiers généraux (pansements en chirurgie digestive, soins d'escarres), petite chirurgie anesthésie locale, endoscopie, soins dentaires...
- Conforme à la norme BS 4272 : Part 2 : 1996
- Déclenchement à moindre effort inspiratoire (enfant, personnes âgées)
- Le corps de la valve à la demande est facile à nettoyer
- Équipée d'un tuyau de raccord standard, EASE II peut être connectée à une bouteille ou à une prise murale
- Filtre patient remplaçable
- Autoclavable à 134 C°
- Maintenance à 5 ans et durée de vie 10 ans



EASE II est un dispositif médical permettant de délivrer de l'oxyde d'azote/oxygène ou de l'oxygène, à la demande. Il peut être utilisé en version portable ou en version basse pression. EASE II est conçu pour soulager au maximum la douleur du patient dans les soins d'urgence, lors de soins plus généraux ou les soins obstétriques.

Conforme à la norme BS4272 : partie 2 : 1996, la valve à la demande est conçue de façon à diminuer au maximum l'effort inspiratoire du patient et peut délivrer de forts débits jusqu'à 300l/min. La valve contient une membrane d'expiration et une valve anti-contamination. EASE II peut être démontée et nettoyée avant d'être réutilisée.

OPTIONS

La gamme EASE II est conçue de façon à permettre aux professionnels de santé de choisir librement leur fournisseurs (bouteilles, chariots et autres accessoires).



EASE II



0715305



850500P



1035575P



VALVE À LA DEMANDE POUR MÉLANGE O₂/N₂O (TYPE ENTONOX®)

Plus légère et de taille plus réduite que la génération précédente, EASE II offre un confort d'utilisation encore meilleur.

Le design spécial de la poignée en facilite la préhension.

De plus, l'incorporation d'un bouton offre deux fonctions intéressantes destinées à :

- > tester le système et sécuriser le patient lors d'une première utilisation ou inhalation.
- > purger le circuit après usage.

Le design extra-plat du bouton évite de plus tout déclenchement inopiné.

Les courbes et la composition simplifiée de la valve EASE II rendent aisées les opérations de nettoyage et de démontage. La valve patient contient une membrane d'expiration et une valve anti-contamination.

Munie d'un flexible de trois mètres d'une qualité robuste, et d'un raccord normalisé coudé, EASE II se connecte rapidement sur la prise du détendeur de la bouteille, en limitant les risques de torsions du tuyau. Pour être prêt à l'emploi, EASE II est livré de série avec un masque adulte à usage unique, 1 embout buccal, un filtre.

La conformité du système complet EASE II est basée sur les normes BS 4272:2, NF EN 737-3, ISO 5359, NFS 90-116. Le système est breveté.

Référence	Désignation
0715305	Valve à la demande O ₂ /N ₂ O (EASE II) avec flexible 3 m NF + 1 masque + 1 embout buccal + 1 filtre

ACCESSOIRES

Référence	Désignation
850500P	Adaptateur d'évacuation gaz expirés
1570000SP	Raccord et tuyau d'évacuation des gaz expirés (3,2 m)

CONSOMMABLES

Référence	Désignation
1035575P	Filtre pour valve à la demande (lot de 100)
1032937	Embout buccal à usage unique (lot de 5)
9462540	Masque à usage unique, taille adulte (lot de 5)
14090500	Masque usage unique oxygène adulte + tubulure 2,10 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - VALVE À LA DEMANDE

Gaz :	O ₂ /N ₂ O – O ₂
Matériaux :	Polycarbonate, silicone, acier inoxydable
Dimensions :	50×50×63 mm
Poids :	85 g
Pression d'alimentation :	2.8 à 8 bar avec débit > 200 l/min
Résistance inspiratoire :	déclenchement à 0.15 – 0.2 kPa
(à 2.8 bar en entrée)	-0.2 kPa à 10 l/min
	-0.7 kPa à 200 l/min
Résistance expiratoire :	déclenchement à 0.35 kPa, 120 l/min
Garantie :	2 ans
Révision :	à 5ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - FLEXIBLE

Raccord :	NF, coudé
Longueur :	3 m
Pression de service :	7 bar
Pression d'éclatement :	44 bar
Matériau :	PVC antistatique suivant ISO 5359
Poids :	0.5 kg

⚠ La valve à la demande EASE II ne délivre de gaz que pendant la durée de l'inspiration. L'économie réalisée en terme de consommation de gaz par rapport à l'utilisation d'un circuit ouvert est de l'ordre de 40 à 50%. De plus, la valve ne débitant pas de gaz lors de la phase expiratoire, le niveau d'exposition du personnel soignant au gaz est proche de zéro. Enfin, la valve à la demande EASE II étant réutilisable, le volume de déchets à retraiter est considérablement réduit en comparaison à l'utilisation de circuits ouverts à usage unique.



VALVE À LA DEMANDE EASE II

EASE II
0715305



Adaptateur
850500P



Filtre
1035575P



Embout buccal à usage unique
1032937



Masque réutilisable
9462540



Masque usage unique
14090500



AMBULANCE PANEL

SYSTÈME AMBULANCE PANEL - APS

Le système de panneau d'ambulance est un système sur mesure contenant un panneau d'ambulance, des flexibles et des détendeurs prêts à être montés dans une ambulance. Le système de panneaux pour ambulance est un système modulaire constitué de composants individuels marqués CE et conforme à la norme EN 1789. Le système de panneaux ambulance comprend trois composants principaux : les détendeurs, les flexibles et les panneaux. Les composants individuels peuvent être combinés dans de nombreuses configurations différentes, offrant ainsi une flexibilité totale à l'utilisateur final.



DÉTENDEURS AMBULANCE



Medireg



Varimed

Le système de panneaux d'ambulance peut être livré avec deux types de détendeurs d'ambulance, le Medireg et le Varimed. Le système de panneaux ambulance peut également être utilisé avec des combivalves*. En règle générale, le Medireg est destiné à une capacité inférieure et le Varimed à une capacité supérieure. Cette capacité est déterminée par l'équipement utilisé dans l'ambulance. Les détendeurs d'ambulance sont conçus pour résister aux conditions routière de l'ambulance et sont fabriqués conformément à la norme EN ISO 10524-1. Les détendeurs d'ambulance sont livrés avec des connexions standard de 3/8" ou des raccords rapides. Le Varimed et le Medireg peuvent être livrés avec un manomètre électronique à raccorder aux systèmes de surveillance de l'ambulance ou du système de contrôle du gaz.

*Certaines restrictions concernant le contrôle de la pression lorsque le système de panneaux d'ambulance comprend un système de surveillance électronique.

FLEXIBLES AMBULANCE

Les flexibles se connectent aux détendeurs et aux panneaux. Les flexibles sont fabriqués selon les spécifications individuelles et sont sertis et testés prêts à être installés dans l'ambulance. Les flexibles peuvent être livrés statiques ou antistatiques. La connexion standard est de 3/8". Les flexibles basse pression peuvent également être livrés avec un renfort en acier inoxydable.

PANNEAUX AMBULANCE

La nouvelle gamme de panneaux d'ambulances de GCE offre une flexibilité inégalée en matière d'installation et de conception. Le concept modulaire utilise des composants communs, ce qui réduit les délais de fabrication et d'installation. Les modules sont infiniment variables et peuvent intégrer des manomètres, des commutateurs, des sorties ou des sélecteurs de débit et une aspiration. Les platines profilées assurent un ajustement parfait au mur de l'ambulance tandis que les bords arrondis évitent que les patients soient exposés à des angles vifs. Le système de manomètres et de commutation clair et simple facilite la surveillance et la visibilité du personnel ambulancier.



Flexible ambulance standard



Acier renforcé

AMBULANCE PANEL

AMBULANCE PANEL II

Le panel ambulance II est la nouvelle génération de panel installé de manière permanente dans les ambulances et personnalisable suivant vos besoins.

FLEXIBILITÉ

De nombreuses variantes sont disponibles suivant le design et les fonctionnalités souhaitées.

MODULARITÉ

Le concept est modulable car les mêmes composants peuvent être utilisés selon différentes variantes. Le panel ambulance II est dessiné de la même manière en version saillie ou encastré.



Sélecteur de débit



Rotamètre



Sortie



Connecteurs



Sélecteur manuel

AMBULANCE PANEL A - MONTAGE À VISSER - FLEXIBLE À COMMANDER SÉPARÉMENT



Référence	Désignation
0715409	Ambulance panel A - Oxygène avec prise Oxygène et 2 sorties NF
0715411	Ambulance panel A - Air avec prise latérale et 2 sorties NF
0715432	Ambulance panel A - Oxygène avec prise latérale et 3 sorties NF
0715433	Ambulance panel A - Air avec prise latérale et 3 sorties NF

Conforme à la norme NF EN 1789. Autres configurations possibles (avec manomètre, avec plus de prises, etc) : nous consulter.

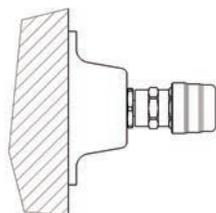


Schéma de montage saillie

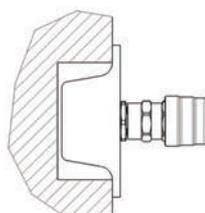


Schéma de montage encastré

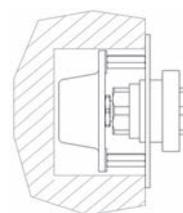


Schéma de montage encastré double



MARS II



SYSTÈME DE RÉANIMATION MANUEL ET AUTOMATIQUE - MARS II

SYSTÈME DE RÉANIMATION MANUEL ET AUTOMATIQUE

- > Mars II est le fruit de recherche et développement approfondi. GCE Sabre compte 30 ans d'expérience dans la fabrication de détendeurs et d'appareils de réanimation.
- > Tous les modèles sont conçus pour répondre à la norme ISO 10651-5:2006, et les directives européennes pour la réanimation 2010 des réanimateurs ventilatoires. Malgré l'existence de nombreuses versions de MARS II Sabre Elite, les produits GCE sont fabriqués avec les mêmes exigences :
 - > Simple
 - > Robuste
 - > Fiable
- > Le MARS II permet à l'utilisateur de se concentrer sur son patient et non pas sur le fonctionnement de l'appareil.
- > Le MARS II est disponible avec les connectiques de tous les standards régionaux : aussi bien au niveau de la connexion d'entrée du détendeur que de la prise rapide de sortie.
- > Le MARS II isole le patient de l'environnement lui permettant la réanimation en tous lieux toxiques, contaminés ou dangereux.
- > Le MARS II peut être utilisé pour des enfants (20kg), adultes de petite taille et adultes.

Référence	Désignation
0715212	Mars II

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - MODULE DE CONTRÔLE MARS II

Gaz :	O ₂
Composants :	laiton, aluminium dans la plupart des pièces, couverture plastique
Dimensions :	165 × 110 × 63 mm
Poids :	1300 g
Raccord d'entrée au détendeur:	Gamme complète de haute pression, orientable vers le module
Pression d'entrée (avec détendeur) :	200–20 bar
Pression d'entrée (sans détendeur) :	3.6–6 bar @ 100lpm
Pression d'utilisation :	3 bar
Raccord d'entrée :	G1/4
Performance du détendeur :	min 100 lpm et min 3 bar
Filtre d'entrée :	30µm
Temps de retour à la réanimation automatique:	5–7 secondes
Consommation de gaz :	9.6 lpm (mode adulte)

MODE STANDARD AUTOMATIQUE

Configuration	Fréquence (min ⁻¹)	Volume courant (ml)	I:E ratio	Durée (s)	Début (s)	Fin (s)
Adulte: 70-100 kg	10	960	1:2	6	2.00	4.00
Adulte de petite taille: 40-70 kg	12	670	1:2	5	1.67	3.33
Enfant: 20-40 kg	20	240	1:2	3	1.00	2.00

DONNÉES SPÉCIFIQUES - ADULTE SEULEMENT (AUTOMATIQUE)

Configuration	Fréquence (min ⁻¹)	Volume courant (ml)	I:E ratio	Durée (s)	Début (s)	Fin (s)
Adulte: 70-100 kg	10	960	1:2	6	2.00	4.00

VENTILATION MANUELLE

Configuration	Débit (l/min)
Adult: 70-100 kg	36
Adulte de petite taille: 40-70 kg	28
Enfant: 20-40 kg	12



SACS ET ACCESSOIRES

SACS ET ACCESSOIRES



Référence	Désignation	Dimensions
1024417	Sac baril bleu	230 mm × 520 mm



Référence	Désignation	Dimensions
1024419	Sac baril rouge	230 mm × 520 mm



Référence	Désignation	Dimensions
1024448	Sac de transport respirateur rectangulaire	220 mm × 160 mm × 170 mm



Référence	Désignation	Dimensions
1017471	Malette en plastique dur MARS	508 mm × 360 mm × 180 mm



Référence	Désignation	Dimensions
1024401A	1.7 litres	240 mm × 490 mm
1024402A	2.7 litres (Est également adapté à la bouteille CD de BOC)	260 mm × 540 mm



MARS II kit complet

Référence	Désignation
1042767	System Mars complet avec détendeur (1-15 l/min) et sac d'urgence rectangulaire à bandoulière
0715227	System Mars II avec flexible AFNOR
0715225	System Mars II avec flexible DIN



ROBINET À DÉTENDEUR DÉBITLITRE INTÉGRÉ POUR GAZ MÉDICAUX

MEDIVITAL®

- Disponible en plusieurs versions, le MEDIVITAL est conçu pour les exigences de tous les types de gaz médicaux, dans différentes applications et des pressions de bouteille allant jusqu'à 300 bars.
- Le gaz provenant de la bouteille est dans un premier temps contrôlé par la vanne d'arrêt puis passe dans le détendeur débitlitre intégré et est délivré au patient par l'olive de sortie ou la prise crantée.
- Ils sont toujours fournis avec une soupape externe de limitation de pression par mesure de sécurité pour l'utilisateur final en cas de surpression.
- Le MEDIVITAL est disponible avec un chapeau de protection et une accroche au lit pour une utilisation facile et sécurisante, par le personnel de santé et les patients.

15 ANS DE DURÉE DE VIE :

- Durée de vie de 15 ans validée par des tests étendus d'endurance, qui répond aux exigences futures du marché.
- Ouverture progressive de la vanne d'arrêt (conception brevetée)
- Manomètre de dernière technologie à haute résistance aux chocs.
- Sélecteur de débit conçu pour un débit de gaz optimal et pour la sécurité du patient
- Chapeau assurant une protection optimale du robinet



AVANTAGES POUR LES UTILISATEURS :



INDICATION DE LA PRESSION

- Bonne visibilité des valeurs
- Large cadran pour lecture plus simple
- Diamètre 40mm
- Echelle de graduation fluorescente



VANNE D'ARRÊT

- Visibilité claire de la position ouverture/fermeture - code couleur
- Indication du sens de l'ouverture, de la fermeture, claire.
- Espace pour une puce électronique dans le volant



UTILISATION SIMPLE DU SÉLECTEUR DE DÉBIT

- Bonne visibilité des débits sélectionnés
- Chiffres visibles : 4,5mm
- Ergonomie optimisée du volant
- Augmentation du débit minimum entre les réglages (50% minimum de la valeur faible)
- Flèche fixe pour indiquer le débit sur l'avant du robinet
- Espace plus dégagé autour des tuyaux et embouts, permet une connexion et déconnexion plus facile des canules et masques
- Espace libre pour une puce électronique dans le bouton de contrôle



PRESSION DE SORTIE

- Entièrement fermée et protégée par le chapeau de protection
- Système d'ouverture et de fermeture aisé avec une large bague de verrouillage en plastique blanc
- Conception améliorée pour les sorties primaires



ROBINET DÉTENDEUR INTÉGRÉ



MEDIVITAL®

UTILISATION FACILE

- > Convient pour une utilisation à domicile, pour les urgences et services hospitaliers
- > Lecture facile du débit sélectionné et du manomètre
- > Vanne d'arrêt avec un code couleur pour la fermeture et l'ouverture
- > Le chapeau de protection ergonomique permet une manipulation simple de la bouteille, par tous les utilisateurs
- > Conception compacte et légère, moins de 1150 gr
- > Matière du chapeau de protection facile à nettoyer

SÉCURITÉ MAXIMUM

- > Testé suivant les normes ISO10524-3 et ASTM G175
- > ISO 10297
- > Marquage CE2460 suivant les directives médicales 93/42/CEE et équipements sous pression transportables 2010/35/UE
- > Composants exempts de phtalates et polymères halogénés.
- > Compatible avec un IRM jusqu'à 3 Tesla
- > À utiliser avec de l'oxygène médical, de l'air et du mélange de gaz O₂/N₂O jusqu'à une pression d'utilisation de 300 bar

ACCESSOIRES

Référence	Désignation
0727421	Poignée d'accroche au lit (lot de 10)
0727418	Support d'humidificateur 9/16 (lot de 10)
0727422	Outillage de serrage sur bouteille

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gaz:	O ₂ , Air, O ₂ /N ₂ O et autres mélanges de gaz médicaux
Pression d'entrée:	Jusqu'à 300 bar (4500 psi)
Pression de sortie:	3.6 à 5.5 bar - selon la norme EN ISO 10524-3 (ou selon les demandes du client)
Pression résiduelle:	>3 bar
Ouverture et fermeture de la soupape:	>5.5 bar
Débit:	0-2, 0-6, 0-15 and 0-25 l/min
Matériaux:	Parties métalliques : laiton
Élastomère :	EPDM, silicone, PUR
Plastique:	PA66, PEEK, PI
Ressorts (en contact avec le gaz):	CuBe2, CuSn6
Dimensions:	Hauteur: 153 mm; Largeur: 112 mm; Profondeur: 118 mm
Poids:*	1150 g
Raccords bouteille:	Filetages coniques ou parallèles (17E, 25E, M18, selon les demandes du client)
Port de remplissage:	ISO 5145, NEVOC ou selon les demandes du client
Statuts réglementaires:	Conforme à la directive médicale 93/42/CEE Conforme à la directive des équipements sous pression transportables 2010/35/UE Conforme à la norme EN ISO 10524-3 Conforme à la norme ISO 10297 Conforme à la norme EN 1789 Conforme à la norme ASTM G175 Fabriqué en conformité avec EN ISO 9001 et EN ISO 13485
Classification:	IIb
Fabricant:	CE s.r.o., Žižkova 381, 583 81 Chotěboř

* MediVital standard (débit 0-15l/min, olive de sortie, raccord rapide DIN) avec protection. Les informations techniques sont données à titre indicatif et sont sujettes à modifications.



ROBINETS DE BOUTEILLES POUR GAZ MÉDICAUX

GCE propose une large gamme de robinets de bouteilles pour gaz médicaux. Ils sont produits, testés et emballés dans de bonnes conditions de propreté. Des règles et des procédures de fabrication strictes sont appliquées pour la fabrication des robinets de bouteilles médicales GCE. Les robinets GCE utilisent des matériaux et des outils de première qualité pour garantir fiabilité et sécurité.

- Disponible dans toutes les connexions d'entrée et de sortie communes
- Pour tous les gaz médicaux
- Volants de différentes couleurs et matériaux
- Capuchons du volant avec logo du client
- Vanne de pression résiduelle en option pour la plupart des robinets
- Versions avec disque de rupture et tube plongeur



Pour les robinets avec vanne à pression résiduelle, GCE propose des adaptateurs de remplissage garantissant la compatibilité avec la conception des cassettes des vanne à pression résiduelle de GCE. Nos robinets disposent du marquage CE et π.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Gaz	O ₂ , Air, N ₂ , Ar, CO ₂ , N ₂ O, He et autres	
Pression d'entrée	jusqu'à 300 bar (4500 psi)	
Fermeture vanne à pression résiduelle	> 2 bar	
Raccords d'entrée	Filetage conique ou parallèle (17E, 25E, M18x1,5 ou selon les spécifications du client)	
Raccords de sortie	Conforme aux normes nationales	
Matériau	Laiton chromé	
Disque de rupture	190, 216, 250, 300 bar, pour CO ₂ et N ₂ O, autres gaz en option	
Température de fonctionnement	-20°C à +65°C	
Température de transport et stockage	-40°C à +65°C	
Statut réglementaire	Conforme à MDD 93/42/EEC	TPED 2010/35 EU
	EN ISO 10297	EN ISO 15996
	Fabriqué en conformité avec EN ISO 9001 et EN ISO 13485	
Classification	IIb	



PETITS ROBINETS MÉDICAUX

- > Pression d'entrée : jusqu'à 200 bar
- > Raccord d'entrée : 17E, M18x1.5
- > Volant ergonomique

OPTIONS

- > Vanne à pression résiduelle
- > Disque de rupture
- > Tube plongeur
- > Volants de différentes couleurs
- > Capuchons du volant avec logo du client





ROBINETS À ÉTRIER

- > Pression d'entrée : jusqu'à 200 bar
- > Raccord d'entrée : 17E, 25E, M18x1.5, 0.750UNF

OPTIONS

- > Vanne à pression résiduelle
- > Disque de rupture
- > Tube plongeur



ROBINETS STANDARD POUR BOUTEILLE (IN LINE)

- > Pression d'entrée : jusqu'à 200 bar
- > Raccord d'entrée : 17E, 25E, 3/4"NGT, 0.750UNF, 1.125UNF

OPTIONS

- > Vanne à pression résiduelle
- > Disque de rupture
- > Tube plongeur
- > Volant en plastique ou en aluminium
- > Volant avec espace pour puce RF
- > Capuchons du volant avec logo du client



ROBINETS STANDARD POUR BOUTEILLE (OFF LINE)

- > Pression d'entrée : jusqu'à 300 bar
- > Raccord d'entrée : 17E, 25E



PRISE MÉDICALE

MEDIUNIT (AFNOR)

Les prises médicales permettent une connexion rapide et sûre des équipements hospitaliers aux réseaux de gaz. Le type de prise médicale est décidé par les normes nationales en vigueur ou parfois par des demandes spécifiques de l'hôpital. GCE est conforme aux normes ISO7396 et aux normes d'installations nationales avec des produits fiables et sécurisés : tous les produits sont testés en production. Nos prises médicales sont conformes aux normes internationales ISO EN 9170-1 et ISO EN 9170-2.

Les boîtiers muraux sont compatibles avec MEDIUNIT normes DIN, BSI, SS, CZ:

- Tous les composants fonctionnels sont en laiton
- Une connexion et une déconnexion très rapide
- Installation simple
- Conçu pour un environnement médical. De petite taille et facile à nettoyer.
- Conforme aux codes couleurs et désignation des normes
- Après 10 ans il est possible d'optimiser les prises avec un pack particulier
- Disponible en version d'installation encastrée, en saillie ou gaine tête de lit






Version encastrée



Version en saillie avec couvercle



Version en saillie sans couvercle

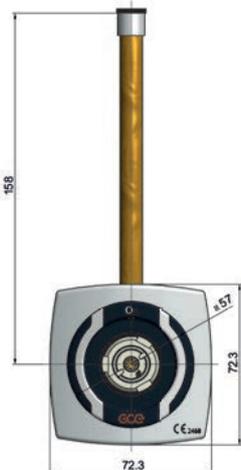

Note!
Dimensions en mm

Référence	Désignation	Type	Marquage
0732204017	O ₂ – ENCASTRÉE	Tuyau ø 10 mm	O ₂
0732204018	N ₂ O – ENCASTRÉE	Tuyau ø 10 mm	N ₂ O
0732204019	AIR – ENCASTRÉE	Tuyau ø 10 mm	AIR
0732204020	AIR-800 – ENCASTRÉE	Tuyau ø 10 mm	AIR-800
0732204021	CO ₂ – ENCASTRÉE	Tuyau ø 10 mm	CO ₂
0732204022	N ₂ – ENCASTRÉE	Tuyau ø 10 mm	N ₂
0732204023	VAC – ENCASTRÉE	Tuyau ø 10 mm	VAC
0732204001	O ₂ – EN SAILLIE	Tuyau ø 10 mm	O ₂
0732204008	N ₂ O – EN SAILLIE	Tuyau ø 10 mm	N ₂ O
0732204003	AIR – EN SAILLIE	Tuyau ø 10 mm	AIR
0732204009	AIR-800 – EN SAILLIE	Tuyau ø 10 mm	AIR-800
0732204002	CO ₂ – EN SAILLIE	Tuyau ø 10 mm	CO ₂
0732204010	N ₂ – EN SAILLIE	Tuyau ø 10 mm	N ₂
0732204004	VAC – EN SAILLIE	Tuyau ø 10 mm	VAC
0732204069	O ₂ – EN SAILLIE - COUVERCLE	Tuyau ø 10 mm	O ₂
0732204072	N ₂ O – EN SAILLIE - COUVERCLE	Tuyau ø 10 mm	N ₂ O
0732204070	AIR – EN SAILLIE - COUVERCLE	Tuyau ø 10 mm	AIR
0732204074	AIR-800 – EN SAILLIE - COUVERCLE	Tuyau ø 10 mm	AIR-800
0732204073	CO ₂ – EN SAILLIE - COUVERCLE	Tuyau ø 10 mm	CO ₂
0732204071	VAC – EN SAILLIE - COUVERCLE	Tuyau ø 10 mm	VAC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gaz :	O ₂ , N ₂ O, Air, Air-800, CO ₂ , N ₂ , Vide
Dimensions :	Hauteur: 73 mm, Largeur: 73 mm, Profondeur: 63 mm
Pression d'utilisation :	4-5 bar (gaz respirable) 7-10 bar (gaz instrument) (-0,4)-(-0,9) bar (vide)
Pression max. :	20 bar
Statut réglementaire :	Conforme à la directive médicale 93/42/CE Conforme à la norme EN ISO 7396-1 (Système de distribution centralisée) Conforme à la norme EN ISO 9170-1 (prise médicale) Conforme à la norme 9170-2 (prise médicale AGSS) Conforme à la norme NF S 90-116 (AFNOR matériel médico chirurgical) Conforme à la norme FD S 90-119 (Prises murales de l'air pour instruments) Conforme à la norme HTM 02-01



Version en saillie



Version encastrée



Cartouche de maintenance



Bouchon

CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Toutes les Clauses et Conditions Générales ci-dessous font la loi des parties. Toute dérogation ou modification ne sera admise que si elle a fait l'objet d'une convention expresse et par écrit, au moment de la vente.

ARTICLE 1 - COMMANDES

Les commandes qui sont adressées directement à GCE SAS. par ses clients ou qui sont transmises par ses représentants ne lient la société que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit. GCE accepte de faire des ajouts de commande si la commande initiale n'est pas saisie dans le système informatique. Si la commande a déjà été saisie informatiquement, l'ajout pourra être considéré comme une autre commande. Un minimum de commande de 100 E.H.T. est requis.

ARTICLE 2 - VENTES

Quel que soit le lieu de destination des produits de GCE SAS., ses usines, magasins ou dépôts constitueront toujours, de convention expresse, le lieu juridique de leur vente et de leur livraison, même en cas de transport par ses soins ou de prix établis franco.

ARTICLE 3 - PRXI

- 1) Tous les prix de GCE SAS. s'entendent nets sans escompte et sont calculés pour un paiement à 45 jours fin de mois ou 60 jours net.
- 2) Les offres de GCE SAS. sont valables pendant deux mois au maximum sauf conditions particulières précisées dans la proposition.
- 3) Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre d'indication, sans engager la responsabilité de GCE S.A.S. en cas de retard.
- 4) Les tarifs de GCE SAS. peuvent être modifiés avec un préavis d'un mois dans le cadre des dispositions légales, notamment en cas de variations du cours des matières premières
- 5) Les descriptifs techniques de GCE SAS. peuvent être modifiés sans préavis dans le cadre des dispositions légales.
- 6) Les dates de paiement convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige.

ARTICLE 4 - PAIEMENT

Les premières factures émises par GCE SAS. pour un client donné sont payables en espèces, chèque bancaire, virement, traite ou lettre de change relevé non acceptée. Par dérogation aux conditions générales sus-indiquées, en cas de relations commerciales suivies, un accord spécial de paiement à terme peut intervenir par écrit au moment de la vente. En cas de retard de paiement par rapport à l'échéance fixée et compte-tenu des obligations inscrites dans l'article 3-1 de la loi du 31/12/1992, l'acheteur sera de plein droit redevable d'une pénalité calculée par l'application d'une fois et demi le taux de l'intérêt légal. Tout défaut de paiement à la date convenue donnera droit, à titre de dommages et intérêts forfaitairement arrêtés, à une indemnité de 10% sans préjudice des Intérêts légaux, des frais de procédure, des dépenses et des frais d'intervention des tiers, tels que: officiers ministériels, organismes de recouvrement, frais de représentation devant les tribunaux. Le non paiement d'une échéance quelconque entrainera automatiquement l'exigibilité de la totalité du solde restant dû.

ARTICLE 5 - EXPÉDITIONS ET TRANSPORTS

Les expéditions, lorsque GCE S.A.S. s'en charge à la demande de son client, sont faites en port dû. Les marchandises et matériels voyagent aux risques et périls du client, même si par dérogation, il s'ont été expédiés franco par les soins de GCE S.A.S., ou proviennent directement d'une usine de fabrication du groupe GCE.

GCE SAS décline Toute responsabilité au sujet des retards provoqués par le séjour des marchandises dans un dépôt de commissionnaire.

Le transport par les soins de GCE SAS. des marchandises vendues ne pourra être considéré que comme un bon office, sans que le client puisse invoquer la responsabilité de GCE SAS., sauf en cas de faute lourde prouvée. Les transferts s'entendent pour marchandises déposées ou reprises à un endroit facilement accessible aux véhicules de transport. En France métropolitaine, le client a le choix entre deux modes de livraison:

1/Le transport normal à partir de la plateforme européenne GCE suivant les conditions de prix ci-contre. Le délai indicatif de transport est de 4 jours minimum.

2/Le transport express, suivant une tarification au poids, communiquée par GCE S.A.S. en fonction du cas auquel il s'applique. Ce mode de transport est facturé au client si la commande est urgente, sauf accord préalable.

ARTICLE 6 - RÉCLAMATIONS

Toutes les réclamations de quelque nature qu'elles soient, doivent être adressées au transporteur au plus tard dans les trois jours qui suivent la livraison juridique de la marchandise, objet de la contesta (ion, puis communiquées, au plus tard cinq jours après, à GCE SAS.

ARTICLE 7 - GESTION DES RETOURS / GARANTIE

Tout retour de marchandise devra faire l'objet d'un accord avec l'assistant clients qui attribuera au client un numéro de retour. Ce numéro signifie le bon pour accord de GCE SAS. sur le retour. Les retours de produits sont gérés commercialement et physiquement sur le site de GCE SAS. à La Charité-sur-Loire. Le matériel doit être exclusivement renvoyé à GCE SAS. ou à son réparateur agréé après acceptation de GCE SAS. en port payé, accompagné d'un document d'identification de l'expéditeur avec toutes informations utiles pour le traitement de la réparation. Des frais de traitement administratifs et logistiques pourront être facturés si le matériel reçu ne provient pas des fabrications de GCE SAS. et si le suivi du matériel d'autres marques de fabricants ne résulte pas d'un accord préalable entre les parties. Tous les

matériels médicaux utilisés et renvoyés devront avoir été préalablement nettoyés et désinfectés.

1. RETOUR POUR RÉPARATION: il est nécessaire de demander à GCE SAS. les coordonnées de son réparateur agréé le plus proche. Aucun matériel ne doit être expédié à son site de La Charité s/Loire.

2. RETOUR SOUS GARANTIE: Il est nécessaire de contacter le service clients pour s'assurer au préalable que le produit à retourner peut entrer dans cette catégorie.

Dans un premier temps, il convient de noter les numéros de lots ou de série et de les communiquer au service clients qui en fera l'analyse. Les produits du présent tarif sont garantis deux ans à compter de la date de livraison chez l'utilisateur, sauf mention contraire stipulée dans l'offre. La durée de la garantie est donnée pour un matériel utilisé dans des conditions normales. La portée de la garantie ne s'applique en aucun cas si des négligences, défauts de surveillance ou d'entretien, ou si une utilisation défectueuse du matériel sont constatés. Toute garantie est également exclue pour des Incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui résultent de l'usure normale du matériel. La garantie inclut uniquement le remplacement gratuit des pièces comportant un vice caché de fabrication provoquant un mauvais fonctionnement du matériel, la main d'oeuvre de remplacement des pièces relatives et le transport du retour du matériel chez le client. GCE SAS. exclut tout dédommagement de frais annexes éventuels engagés pour mise en oeuvre d'un matériel défectueux par son propriétaire.

3. ERREUR DU CLIENT À LA COMMANDE: le retour sera accepté avec une décote minimale de 20% couvrant les frais de gestion du retour auprès de la plateforme logistique centrale du groupe GCE et le reconditionnement du produit. Le port vers la plateforme sera dans ce cas à la charge du client.

4. ERREUR DE GCE: le retour sera accepté au prix facturé et le transport pris en charge par GCE SAS.

ARTICLE 8 - JURIDICTION

Toutes contestations de toutes actions judiciaires sans exception, de quelque nature qu'elles soient, devront être portées devant les tribunaux de Nevers, seuls compétents, lors même qu'il y aurait pluralité de défendeurs ou qu'il s'agirait d'appels en garantie.

ARTICLE 9 - PROPRIÉTÉ

Le transfert de propriété du matériel ne sera effectif qu'à la date où l'acquéreur en aura intégralement payé le prix.

ARTICLE 10 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU DISTRIBUTEUR

Les Définitions selon MDR :

«Distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un dispositif à disposition sur le marché jusqu'à sa mise en service.

«Opérateur économique» un fabricant, un mandataire, un importateur ou un distributeur

Le client / distributeur reconnaît ses obligations et doit à tout moment agir conformément à l'article 14 du chapitre II du MDR, «Obligations générales du distributeur».

a) Assurez-vous que les informations fournies avec le produit accompagnent le produit dans le format du document d'origine ou sont incluses dans le pack d'informations fourni.

b) En cas de problème, en particulier de vigilance:

a. Les distributeurs et tous les opérateurs économiques doivent coopérer avec le fabricant et les autorités pour faire en sorte qu'une enquête sur les causes profondes puisse être menée. Le fabricant peut alors décider des actions correctives nécessaires pour mettre le dispositif en conformité, le retirer ou le rappeler, le cas échéant.

b. Les produits concernés doivent être mis à la disposition du fabricant, sur demande, avec les produits connexes tels que les bouteilles de gaz, les robinets et autres équipements.

c) Pour l'identification au sein de la chaîne d'approvisionnement, les opérateurs économiques tels que les importateurs, les distributeurs et les professionnels de la santé doivent atteindre un niveau approprié de traçabilité des produits avec les fabricants, conformément à l'article 25, chapitre III du MDR.

d) Sur une période de 10 ans ou au moins sur la durée de vie du produit indiquée, les opérateurs économiques doivent être en mesure d'informer l'autorité compétente ou le fabricant sur :

- a. Tout opérateur économique auquel ils ont directement fourni un appareil;
- b. Tout opérateur économique qui leur a directement fourni un appareil;
- c. Tout établissement de santé ou professionnel de la santé auquel ils ont directement fourni un dispositif

e) Outre les obligations définies pour les opérateurs économiques dans le chapitre II du MDR et tenant compte de la manière dont le produit est fourni et utilisé, notamment en ce qui concerne la confidentialité du patient, les éléments suivants sont attendus:

- a. Soutenir les actions correctives du marché en cas de vigilance, telles que le rappel, la rénovation ou la diffusion des avertissements de sécurité, par exemple l'identification des utilisateurs concernés, la mise en quarantaine et le retour des produits suspects, etc. à la demande de GCE.
- b. Sur demande, collecte de données cliniques et autres en tant que données d'entrée pour le suivi clinique post-commercialisation et la surveillance post-commercialisation.

CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT

MONTANT DE LA COMMANDE (NET H.T.)

< 100 €
De 100 € à 349,99 €
≥ 350 €

PARTICIPATION FORFAITAIRE AUX COÛTS DU TRANSPORT

40,00 € H.T.
28,00 € H.T.
Franco de port

Les tarifs indiqués sont supposés fermes pendant la période. Cependant, certains prix peuvent être susceptibles de modifications, sans avertissement préalable, sauf au moment de l'établissement d'un devis expressément demandé. Malgré tout le soin apporté à la rédaction de ce catalogue, la responsabilité de GCE ne saurait être engagée du fait d'erreurs de transcription ou de typographie. GCE se réserve le droit de faire évoluer les caractéristiques techniques à tout moment de façon unilatérale, sans nécessairement d'avertissement préalable. Se conformer à la notice livrée avec chaque produit pour les conditions d'utilisation et de maintenance.

BUREAUX DE VENTE

EUROPE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
FRANCE
ALLEMAGNE
HONGRIE
ITALIE
POLOGNE
PORTUGAL
ROUMANIE
ESPAGNE
SUÈDE
ROYAUME-UNI & IRLANDE

AMÉRIQUE

AMÉRIQUE LATINE
MEXIQUE
ÉTATS-UNIS

ASIE

CHINE
INDE
RUSSIE



www.gcegroup.com